

návod k použití

MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ NA NOHY S VYHŘÍVÁNÍM

Model: MGF-1005

Úvod

Děkujeme, že jste se rozhodli pro masážní přístroj na nohy s vyhříváním firmy Naipo. Přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte si jej, abyste se k němu v případě potřeby mohli vrátit. Budete-li potřebovat jakoukoliv pomoc, obraťte se na naše oddělení podpory zákazníků. Při položení dotazu je nezbytné uvést modelové označení přístroje a číslo objednávky.

Balení obsahuje

- 1 x masážní přístroj na nohy
- 1 x návod k použití
- 1 x síťový adaptér

Technické údaje

Model: MGF-1005

Označení: masážní přístroj na nohy s vyhříváním Naipo


Napájení: 12 V, 1,5 A

Hmotnost přístroje: 1,6 kg

Výchozí časovač: 15±1 minut

Funkce: masírování / vibrační masáž / zahřívání

Schéma přístroje

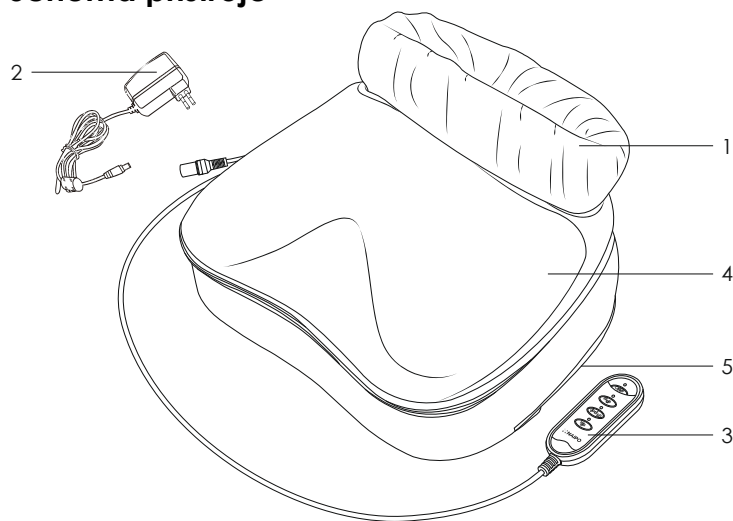

1. odnímatelný a pratelný kryt nohou
2. síťový adaptér
3. ovladač
4. kryt z polyuretanové kůže (je odnímatelný a přístroj pak slouží k masáži chodidel)
5. protiskluzová podložka

Důležité bezpečnostní pokyny

Přístroj nepoužívejte ve vlhkém prostředí (například v koupelně), aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem či k jiným bezpečnostním problémům.

- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření ani vysokým teplotám.
- Na výrobek nesedějte.
- Dbejte, aby nedošlo k poškození výrobku ostrými předměty; nepřekrčujte napájecí kabel; nepoužívejte výrobek, má-li poškozený napájecí kabel.
- Před čištěním výrobek odpojte od elektrické sítě; nečistěte jej žíravými prostředky.

- Uložte výrobek na bezpečném, suchém a větraném místě; není-li výrobek dlouho v činnosti, přikryjte jej kusem látky, abyste zabránili znečištění přístroje prachem.

Otázky a odpovědi

Problém	Příčina	Řešení
Přístroj nezvykle zapáchá.	Výrobek se dostal k zákazníkovi brzy poté, kdy opustil výrobní linku. Plastový zápach přetrvává, je-li přístroj ponechán příliš dlouho v obalu.	Výrobek na několik dní umístěte bez obalu na dobře větraném místě, aby se zbavil nezvyklého zápachu.
Výrobek je při činnosti hlučný.	Přístroj je hlučný, pokud je zapnutá funkce vibrační masáže.	Hluk je možné zmírnit, pokud přístroj umístíte na rovný povrch.
Přístroj se sám vypne.	Přístroj se vypíná automaticky po 15 minutách nepřetržitého používání.	Stiskem tlačítka ON/OFF přístroj znovu zapněte.

Návod k používání přístroje

K dispozici je tlaková masáž, vyhřívání a vibrační masáž. Po připojení k elektrické síti se přístroj přepne do pohotovostního režimu. Níže najdete pokyny, jak používat tlačítka:

1. Tlačítko ON/OFF

Po připojení k elektrické síti se přístroj přepne do pohotovostního režimu. Stiskem tohoto tlačítka přístroj zapnete, rozsvítí se příslušná kontrolka a budou funkční všechna ostatní tlačítka. Tlaková masáž v režimu I, vibrační masáž a funkce vyhřívání se zapínají automaticky s časovačem na 15 minut. Máte-li přístroj zapnutý, stiskem tohoto tlačítka jej přepnete zpět do pohotovostního režimu. Výrobek se automaticky přepne do pohotovostního režimu, jakmile vyprší čas.

2. Tlačítko režimu (2 směry masáže / volitelně automatická změna směru)


Jestliže přístroj pracuje bez tlakové masáže, stiskem tohoto tlačítka zapnete tlakovou masáž v režimu I, kdy ukazatel nepřetržitě svítí. Když přístroj pracuje v režimu tlakové masáže I, přepnete jej stiskem tohoto tlačítka do režimu tlakové masáže II a ukazatel začne pomalu blikat. Když přístroj pracuje v režimu tlakové masáže II a stisknete toto tlačítko, přepnete jej do režimu tlakové masáže III, kdy ukazatel bliká rychle. Dalším stiskem tlačítka v režimu tlakové masáže III tuto masáž zastavíte a ukazatel zhasne.

3. Tlačítko vibrace

Jestliže přístroj pracuje bez vibrační funkce, stiskem tohoto tlačítka funkci vibrace zapnete a rozsvítí se příslušná kontrolka. Je-li vibrační funkce zapnutá, stiskem tohoto tlačítka ji vypnete a kontrolka zhasne.

4. Tlačítko vyhřívání

Jestliže přístroj pracuje bez funkce vyhřívání, stiskem tohoto tlačítka funkci vyhřívání zapnete a rozsvítí se příslušná kontrolka. Je-li funkce vyhřívání zapnutá, stiskem tohoto tlačítka ji vypnete a kontrolka zhasne.

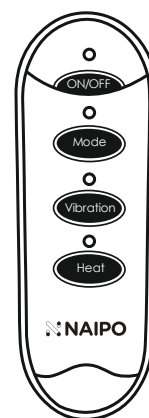

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o. , V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

Vyrobeno v Číně



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz