

## Használati útmutató

### DERÉKTÁJI MASSÍROZÓ REZGÉSSSEL ÉS FŰTÉSSEL

#### MGBK-Q1

#### BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy melegítéssel, buborékokkal és vibrációval ellátott ágyékmasszírozót vásárolt. Olvassa el figyelmesen ezt a kezelési útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. Ha segítségre van szüksége, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Kérdezéskor meg kell adni a készülék típusmegnevezését és a rendelési számot.

#### A csomag tartalma

- 1x masszázskészülék ágyéki masszázsához
- 1 x használati utasítás
- 1x hálózati adapter


#### Fontos biztonsági utasítások

1. Az alábbiakban felsorolt személyeknek a termék használata előtt konzultálniuk kell az orvossal. A készülék első használata előtt javasoljuk, hogy kézzel fújja fel a légpárnát, és fújja fel kapacitásának körülbelül 50%-ára. A termék első használatakor ne fújja fel túlságosan a légszakot, nehogy megsérüljön.
2. Ne használja a készüléket folyamatosan 30 percnél tovább.
3. Fűtés funkció: A készülék kb. 1 percet vesz igénybe, hogy felmelegedjen.

#### Kérdések és válaszok

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A készülék nem működik, vagy leállt.	Győződjön meg arról, hogy a váltóáramú adapter megfelelően illeszkedik a konnektorba.
	Győződjön meg arról, hogy az adapter megfelelően csatlakozik a készülékhez.
	A készülék 15 perc folyamatos használat után automatikusan kikapcsol. Kapcsolja ki, majd be a terméket.
	A túlmelegedés elleni védelem aktiválódott, mert a készüléket túl sokáig használták (főleg, ha kb. 15 perc után többször is használták). Húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja hűlni legalább 1 órán keresztül.
	Ha a fenti eljárások egyike sem oldja meg a problémát, Forduljon egy javítóműhelyhez.

#### Kezelőpanel

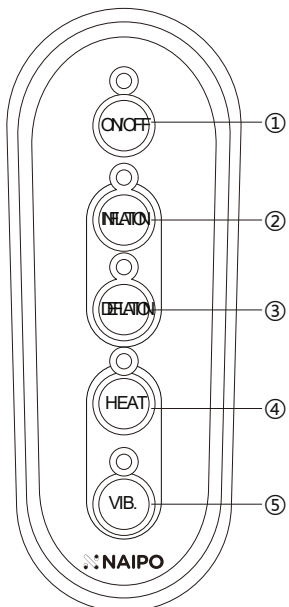

##### 1. Főkapcsoló

Amikor a készüléket az áramforráshoz csatlakoztatja, a kapcsoló melletti jelzőfény pirosan villogni kezd. Nyomja meg a főkapcsolót a készülék bekapcsolásához, és a jelzőfény folyamatosan világít. A készülék olyan üzemmódba kapcsol, amelyben a felfújás, leeresztés, fűtés és vibráció automatikusan működik.

##### 2. Felfújás gomb

Nyomja meg a gombot, hogy kézi üzemmódba váltson. Nyomja meg és tartsa lenyomva a légszak felfújásához. Ha a zsák teljesen fel van fújva, a felfújás leáll.

##### 3. Fújás gomb

Nyomja meg a gombot, hogy kézi üzemmódba váltson. Nyomja meg és tartsa lenyomva a légszak kifújásához. Amint a légszak teljesen kiengedett, a leeresztés leáll.


##### 4. Fűtés gomb

A készülék bekapcsolásakor a fűtési funkció automatikusan bekapcsol, és a gomb közelében lévő jelzőfény pirosan világít. Nyomja meg a gombot a fűtés kikapcsolásához, és a lámpa kialszik.


##### 5. Rezgés gomb

A készülék bekapcsolásakor a vibrációs funkció automatikusan bekapcsol, és a gomb melletti jelzőfény pirosan világít. Nyomja meg a gombot a rezgés kikapcsolásához, és a lámpa kikapcsol.



## Készülék diagram

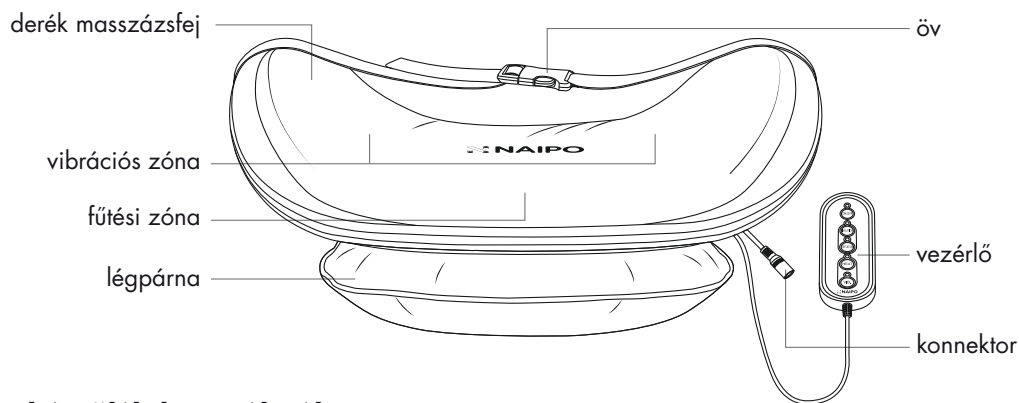

## Útmutató a készülék használatához

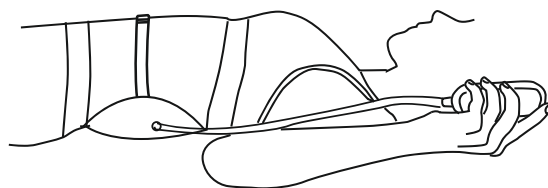

1. Rögzítse a készüléket ragasztószalaggal, és lassan helyezze a hátára. Lefekvés után állítsa be a testhelyzetét, indítsa el a masszázst és állítsa be a vezérlő segítségével a készülék működési módjait.

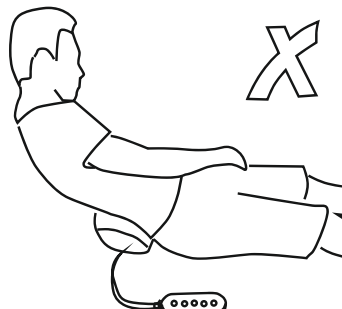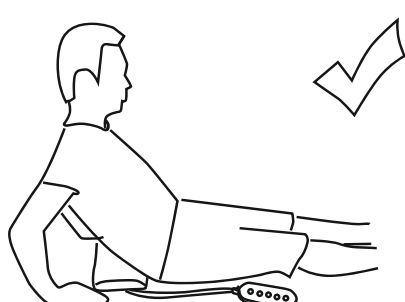

2. A készülék 15 perces masszázs után automatikusan kikapcsol. A bekapcsológomb megnyomásával idő előtt is kikapcsolhatja. A masszázs után a légpárnát fújjuk ki, lazítsuk meg a pántot és fekdjünk le még 1-3 percig, majd lassan álljunk fel a kartámaszsal.

## Termék karbantartása

- Soha ne engedje, hogy víz vagy másfolyadék kerüljön a készülékbe, ellenkező esetben az megsérül.
- Tisztítsa meg a terméket puha, enyhén nedves ruhával.
- Tárolja a terméket tiszta, száraz és hűvös helyen. A terméket soha ne tegye ki túl hosszú ideig közvetlen napsugárzásnak.

## MŰSZAKI ADATOK

Terméknév	Naipo masszázskészülék deréktáji masszázshoz rezgéssel és melegítéssel
Típus	MGBK-Q1
Tápellátás	12 V 1 A
Áramfelvétel	12 W
Időzítő	15 perc
Terhelhetőség	100 kg
A fűtött felület hőmérséklete	≅ 45 °C

## Garancia és ügyfélszolgálat

Ha segítségre van szüksége a termék használatával kapcsolatos problémák megoldásához, egyéb szolgáltatások igénybeviteléhez stb., forduljon hozzánk a <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/> weboldalon keresztül

Jótállási idő a vásárlástól számított 2 év.

NEOX GROUP s. R. O.,  
V Slavětíně 2632/23,  
Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Csehország  
Kínában készült.



NEOX GROUP s.r.o. [www.neoxgroup.cz](http://www.neoxgroup.cz)

