

Használati útmutató
NYAK-HÁTMASSZÁZS KÉSZÜLÉK
Modell: oCuZen S



FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A termék használata során be kell tartani az alábbi alapvető biztonsági előírásokat. Őrizze meg ezt a kézikönyvet mindaddig, amíg a termék tulajdonosa, hogy emlékezzen az utasításokra.



VESZÉLY

Az áramütés, égési sérülés és tűz kockázatának csökkentése: Használat után és tisztítás előtt mindig húzza ki a terméket a konnektorból. Ne szerelje szét a terméket.

FIGYELEM

Az áramütés kockázatának csökkentése:



Ne használja a terméket takaró és párna alatt; hagyja hatni a természetes hőt, hogy megakadályozza a termék túlmelegedését, ami tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.



Ne a vezetéknel fogva húzza ki.



A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel és csak az adattáblán feltüntetett feszültségű hálózatban használja.



Ne használja olyan helyeken, ahol marószert használnak, vagy ahol oxigénellátás van.



Ne használja magas páratartalmú (pl. fürdőszoba) és magas hőmérsékletű helyeken. Fennáll az áramütés vagy más biztonsági veszély kockázata.



Ne tegye ki magas hőmérsékletnek, ne hagyja a terméket járműben.



Ne használja a szabadban.

Figyelmeztetés - A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást.



Ez a termék személyes masszázshoz készült. Nem gyógyászati célú termék, és nem használható pénzkereső tevékenységre.



Ezt a terméket csak az ebben a kézikönyvben leírt célokra használja.



Kapcsolja ki a terméket, ha nem használja.



A hálózatra csatlakoztatott terméket nem szabad felügyelet nélkül hagyni. Húzza ki, ha nem használja.



A termék fűtési funkcióval van felszerelve. A hőre érzékeny személyeknek óvatossá kell lenniük a termék használatakor.



A súlyos égési sérülések elkerülése érdekében a tápkábel nem érintkezhet forró felületekkel.



Különös figyelmet kell fordítani a leginkább igénybe vett részekre. A hibás alkatrészeket azonnal cserélje ki, ill hagyja abba a termék használatát, amíg meg nem javítják.



Ne használja a terméket, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, ha nem működik megfelelően, ha a földre esett, ha megsérült vagy vízbe esett.



Hagyja abba a termék használatát, ha kényelmetlenséget vagy fájdalmat érez használat közben.



Hagyja abba a termék használatát, ha nem működik megfelelően.



Ne használja a terméket vezetés közben, és tartsa be a vonatkozó közlekedési szabályokat.



Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel, a tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Ha az alábbi helyzetek érvényesek Önre, a készülék használata előtt konzultáljon orvosával:



Testi fogyatékkal élők.



Mentálhigiénés problémákkal küzdők vagy tapasztalattal nem rendelkezők.



Krónikus betegségben szenvedők.



Terhes nők.



Nők a menstruáció alatt.




Fiziológiai vagy egyéb egészségügyi problémákkal küzdők.




Pacemakerrel rendelkező vagy egészségük miatt aggódó emberek.



MASSZÁZS TERÜLETEK

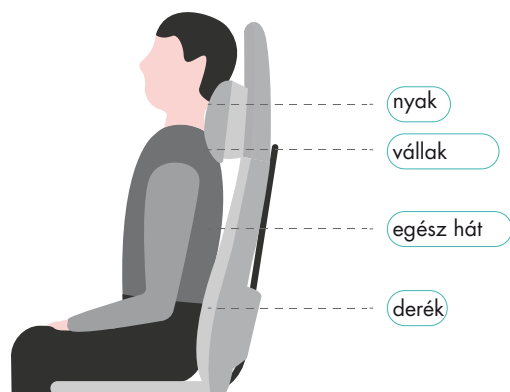


A TERMÉK RÉSZEI

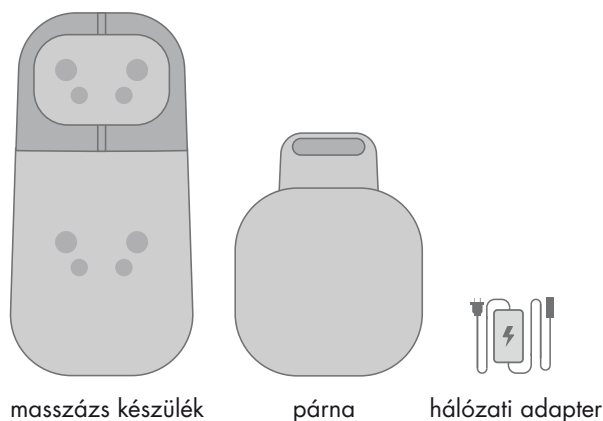

A TERMÉK TULAJDONSÁGAI

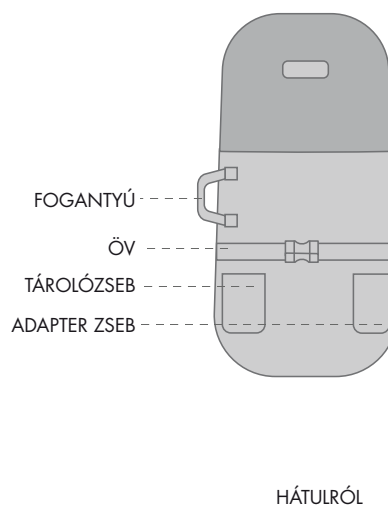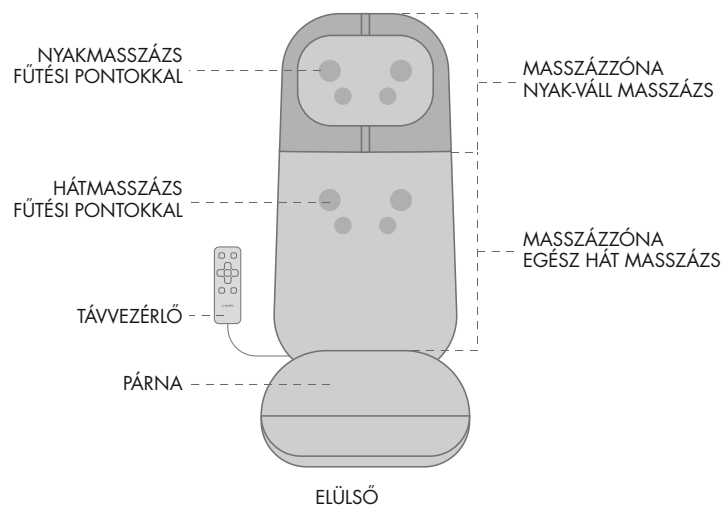

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

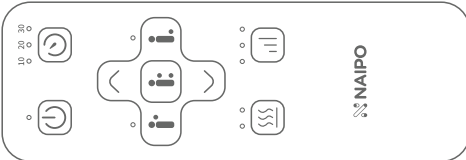

Hogyan kell használni a terméket

Csatlakoztassa a terméket a hálózathoz. A termék készenléti módba lép.

- Bekapcsológomb: Nyomja meg ezt a gombot, ha a termék készenléti módban van. A tápellátás jelzőfénye pirosan világít. Az alapértelmezett masszázsmód be van kapcsolva: nyak és hát „alacsony” és „magas” fűtési fokozattal.
- Időzítő: A termék bekapcsoláskor 10 percre van beállítva az időzítővel. Nyomja meg ezt a gombot a masszázs időtartamának megváltoztatásához: 10/20/30 perc. A kiválasztott idő elteltével a termék kikapcsol.
- Nyak: Amikor a termék be van kapcsolva, nyomja meg hosszan ezt a gombot fel/le párna helyzetének beállításához. A gomb elengedésekor a párna leáll.
- Hát: Amikor a termék be van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot a hátmasszázs beállításának vagy a megadott pontmódosítás elindításához a hátrészen: Nyomja meg és tartsa lenyomva a fel / le gombokat a fel és le masszázs pozíció beállításához. A gomb elengedésekor a masszázs csomópontjai leállnak, és a hátmasszázs a kiválasztott helyen folytatódik.
- Automatikusan: A termék bekapcsolása után automatikusan elindul a nyak- és hátmasszázs. Ha más masszázsmódokat használ, nyomja meg ezt a gombot az alapértelmezett beállítások visszaállításához.
- Fűtés: A „magas” fűtési fokozat automatikusan bekapcsol a termék bekapcsolásakor. Nyomja meg a gombot a fűtési fokozat megváltoztatásához. Fokozatosan a magas szint, az alacsony szint és a fűtés kikapcsol.
- Sebesség: A termék bekapcsolása után nyomja meg ezt a gombot a masszázs sebességének megváltoztatásához. A beállítás fokozatosan alacsonyról közepesre magasra változik.

Nyak- és hátmasszázs funkciók:

- Csak nyakmasszázs: Nyomja le 2 másodpercig a nyakmasszázs funkció kikapcsolásához. Ez nem befolyásolja a hátmasszázs funkciót. Nyomja meg újra a nyakmasszázs újraindításához.
- Csak hátmasszázs: Nyomja le 2 másodpercig a hátmasszázs funkció kikapcsolásához. Ez nem befolyásolja a nyakmasszázs funkciót. Nyomja meg újra a hátmasszázs újraindításához.
- Ha külön nyak- vagy hátmasszázs van bekapcsolva, ennek a gombnak a megnyomása visszaállítja az alapértelmezett masszázsbéállításokat mindkét testrésze.

Fűtési funkció:

- Nyomja meg 2 másodpercig a fűtési mód kikapcsolásához. A nyak- és hátmasszázs leáll. Nyomja meg a „magas” és „alacsony” szintek közötti váltáshoz.

Fűtés üzemmódban:

- Nyomja meg, hogy visszaváltson az alapértelmezett masszázsmódra.
- Nyomja meg a gombot a nyak funkció elindításához, és nyomja meg a fel/le gombokat a nyakmasszázs pozíciójának beállításához.
- Nyomja meg a fix pont masszázis elindításához a háton, és nyomja meg a fel/le gombokat a hátmasszázs pont helyzetének beállításához.

Használat közben vegye figyelembe:

- Naponta legfeljebb 30 percig használja a készüléket.
- Ne használja alvás közben.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS





A termék károsodásának és elszíneződésének elkerülése érdekében ne tisztítsa maró hatású tisztítószerrel. Ne szúrja ki a terméket, és ne karcolja meg éles tárgyakkal.



Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a termék ki van kapcsolva, és a hálózati adapter ki van húzva. Tisztítsa meg száraz ruhával.



Tartsa tisztán a terméket és tárolja biztonságos helyen. Kerülje a magas páratartalmú és hőmérsékletű környezetet.

| Probléma | Megoldás |
|--|--|
| a termék nem működik megfelelően | Csatlakoztassa az adaptert és ellenőrizze a vezetékeket. Az időzítő beállított ideje lejárt. Nyomja meg újra a bekapcsológombot. |
| csak fűtés a masszázscsomópontok működése nélkül | A termék túl sokáig volt használatban és túlmelegedett, ezért a biztosítéka kioldott. Húzza ki a készüléket a konnektorból, és várjon körülbelül egy órát, amíg kihűl. |
| nyakmasszázs nem éri el a kívánt helyet |  Nyomja meg az automatikus funkciógombot, és a masszázs újraindul. |
| |  Állítsa be a masszázspárna helyzetét a nyakmasszázs gomb megnyomásával. |

MEGJEGYZÉS: Ne szerelje szét a terméket saját maga. A NAIPO nem vállal felelősséget a nem szakemberek által okozott veszteségekért a termék szétszerelése vagy módosítása. Ha így tesz, a felhasználó ki van téve, vagy a termék használhatatlanná válik. További segítségért forduljon az ügyfélszolgálathoz.

A NAIPO nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, kárért vagy javítási költségért, amely az alábbiakból ered, vagy amikor:

- A jótállási idő lejárt.
- Szakszerűtlen beavatkozások elvégzése: termékjavítás, nem rendeltetésszerű használat, vagy bánásmód, átalakítás, szétszerelés.
- Véletlen vagy nem szándékos kár.
- A belső vagy külső csomagolás sérülése vagy hiányzó tartozékok.
- Vis maior okozta hiba.

FCC MEGFELELŐSÉGI ÉRTESETÉS

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A készülék működése akkor lehetséges, ha két feltétel teljesül:

(1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem professzionális interferencia által okozott rádió- vagy televízió-interferenciáért.

Az ilyen módosítás megfosztja a felhasználót a termék manipulálásának jogától.

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és úgy találták, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek a 15. rész szerinti FCC előírásoknak. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetelben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak arra biztatjuk, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát az alábbiak közül egy vagy több segítségével:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-technikustól.

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-----------------------|---|
| megnevezése: | oCuZen S nyak- és hátmasszázs készülék |
| modell: | oCuZen-S1 |
| súly: | ≈ 4,96 kg |
| méret: | hosszúság 820 x szélesség 450 x magasság 240 mm |
| tápellátás: | 12 V \approx 4,0 A |
| teljesítményfelvétel: | 48 W |

Garancia és ügyfélszolgálat

Ha segítségre van szüksége a termék használatával kapcsolatos problémák megoldásához, egyéb szolgáltatások igénybevételéhez stb., vegye fel velünk a kapcsolatot a <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/> weboldalon.

Jótállási idő a vásárlástól számított 2 év.

Kínában készült



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz