

Návod na použitie

MASÁŽNY PRÍSTROJ NA NOHY S VYHRIEVANÍM

Model: MGF-1005

Úvod

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre masážny prístroj na nohy s vyhrievaním od firmy Naipo. Prečítajte si pozorne tento návod na použitie a uschovajte si ho, aby ste sa k nemu v prípade potreby mohli vrátiť. Ak budete potrebovať akúkoľvek pomoc, obráťte sa na naše oddelenie podpory zákazníkom. Pri pomoci s Vaším problémom, je nevyhnutné uviesť modelové označenie prístroja a číslo objednávky.

Balenie obsahuje

- 1 x masážny prístroj na nohy
- 1 x návod na použitie
- 1 x sieťový adaptér

Technické údaje

Model: MGF-1005

Označenie: masážny prístroj na nohy s vyhrievaním Naipo


Napájanie: 12 V, 1,5 A

Hmotnosť prístroja: 1,6 kg

Prednastavený časovač: 15±1 minút

Funkcie: masírovanie / vibračná masáž / zahrievanie

Schéma prístroja

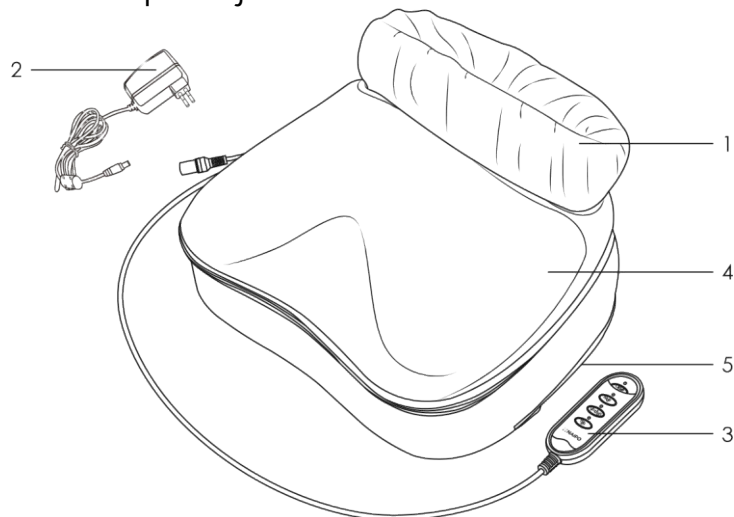

1. odnímateľný a prateľný kryt nôh
2. sieťový adaptér
3. ovládač
4. kryt z polyuretánovej kože (je odnímateľným a prístroj potom slúži na masáž chodidiel)
5. protišmyková podložka

Dôležité bezpečnostné pokyny

Prístroj nepoužívajte vo vlhkom prostredí (napríklad v kúpeľni), aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom či k iným bezpečnostným problémom.

- Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu ani vysokým teplotám.
- Na výrobok nesadajte.
- Dbajte, aby nedošlo k poškodeniu výrobku ostrými predmetmi; neprekrúcajte napájací kábel; nepoužívajte výrobok, ak má poškodený napájací kábel.

- Pred čistením výrobok odpojte od elektrickej siete; nečistite ho agresívnymi prostriedkami.
- Uložte výrobok na bezpečnom, suchom a vetranom mieste; pokiaľ nie je výrobok dlhšiu dobu v činnosti, prikryte ho kusom látky, aby ste zabránili znečisteniu prístroja prachom.

Otázky a odpovede

Problém	Prčina	Riešenie
Prístroj neobvykle zapácha.	Výrobok sa dostal k zákazníkovi hneď potom, ako opustil výrobnú linku. Plastový zápach pretrvávajú, pokiaľ je prístroj ponechaný príliš dlho v obale.	Výrobok na niekoľko dní umiestnite bez obalu na dobre vetranom mieste, aby sa zbavil neobvyklého zápachu.
Výrobok je pri činnosti hlučný.	Prístroj je hlučný, pokiaľ je zapnutá funkcia vibračnej masáže.	Hluk je možné zmierniť, pokiaľ prístroj umiestnite na rovný povrch.
Prístroj sa sám vypne.	Prístroj sa vypína automaticky po 15 minútach nepretržitého používania.	Stlačením tlačidla ON/OFF prístroj znovu zapnete.

Návod na používanie prístroja

K dispozícii je tlaková masáž, vyhrievanie a vibračná masáž. Po pripojení k elektrickej sieti sa prístroj prepne do pohotovostného režimu. Nižšie nájdete pokyny, ako používať tlačidlá:

1. Tlačidlo ON/OFF

Po pripojení k elektrickej sieti sa prístroj prepne do pohotovostného režimu. Stlačením tohoto tlačidla prístroj zapnete, rozsvieti sa príslušná kontrolka a budú funkčné všetky ostatné tlačidlá. Tlaková masáž v režime I, vibračná masáž a funkcie vyhrievania sa zapínajú automaticky s časovočom na 15 minút. Pokiaľ máte prístroj zapnutý, stlačením tohoto tlačidla ho prepnete späť do pohotovostného režimu.

Výrobok sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, akonáhle vyprší čas.

2. Tlačidlo režimu (2 smery masáže / voliteľná automatická zmena smeru)


Pokiaľ prístroj pracuje bez tlakovej masáže, stlačením tohoto tlačidla zapnete tlakovú masáž v režime I, kedy ukazovateľ nepretržite svieti. Ak prístroj pracuje v režime tlakovej masáže I, prepnete ho stlačením tohoto tlačidla do režimu tlakovej masáže II a ukazovateľ začne pomaly blikať. Ak prístroj pracuje v režime tlakovej masáže II a stlačíte toto tlačidlo, prepnete ho do režimu tlakovej masáže III, kedy ukazovateľ blika rýchlo. Ďalším stlačením tlačidla v režime tlakovej masáže III túto masáž zastavíte a ukazovateľ zhasne.

3. Tlačidlo vibrácia

Pokiaľ prístroj pracuje bez vibračnej funkcie, stlačením tohoto tlačidla funkciu vibrácie zapnete a rozsvieti sa príslušná kontrolka. Ak je vibračná funkcia zapnutá, stlačením tohoto tlačidla ju vypnete a kontrolka zhasne.

4. Tlačidlo vyhrievanie

Pokiaľ prístroj pracuje bez funkcie vyhrievania, stlačením tohoto tlačidla funkciu vyhrievania zapnete a rozsvieti sa príslušná kontrolka. Ak je funkcia vyhrievania zapnutá, stlačením tohoto tlačidla ju vypnete a kontrolka zhasne.

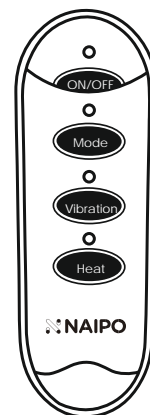

Záruka a služby zákazníkom

Ak potrebujete pomoc vyriešiť problémy s používaním výrobku, využijte ďalšie služby apod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záručná lehota sú 2 roky od dátumu nákupu.

NEOX GROUP s. r. o. , V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

Vyrobené v Číne



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz