


Návod k použití

Bezdrátový ruční perkusní
masážní přístroj Naipo

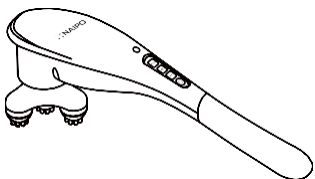

Model: MGPC-5610

Obsah

Čeština: _____ 01-04

Úvod

Děkujeme za zakoupení perkusního bezdrátového ručního masážního přístroje Naipo. Tento návod si pečlivě přečtěte a uschovejte jej na bezpečné místo pro pozdější použití. V případě, že byste potřebovali jakoukoliv pomoc, můžete se obrátit na naše oddělení podpory. Máte pro tento účel připravené číslo modelu výrobku společně s číslem vaší objednávky přidělené internetovým obchodem Amazon.

Obsah balení:

- 1 x ruční masážní přístroj
- 1 x návod k použití
- 3 x výměnné příslušenství
- 1 x nabíječka
- 1 x stojan

Specifikace výrobku

Model	MGPC-5610
Název	Bezdrátový ruční perkusní masážní přístroj Naipo
Napájení	DC 9V
Řízení	9 W
Délka masáže	20 minut
Li-ion	1 800 mAh
Čas nabíjení	2,5 h
Pracovní čas	1,5 h

Varování

- Při čištění, údržbě či přesunu vytahněte zástrčku ze zásuvky.
- Dávejte si k neočekávané situaci, přístroj vypněte.
- Nevytahujte ani nenapojujte kabel do zásuvky mokřima rukama.
- Nepoužívejte přístroj ve vlhkých prostorech, například v koupelně.

- 01 -

- Neručte, neohýbejte ani nemanipulujte s napájecím kabelem, mohl by způsobit požár.
- Pravidelně čistěte adaptér.
- Nevystavujte přístroj po delší dobu slunečním paprskům.
- Neupravujte výrobek.
- Výrobek nepoužívejte během spánku.
- Neumývejte výrobek vodou.
- Při delším používání musí být výrobek pod dohledem.
- Děti nesmějí výrobek používat; dejte jej na bezpečné místo mimo jejich dosah.

Odstraňování problémů


Problém	Řešení
Masážní podložka nefunguje.	Zkontrolujte napětí v síti. Zapojte kabel zpět do zásuvky.
Ovladač během provozu funguje, ale masážní přístroj ne.	Masážní přístroj se přehřívá kvůli dlouhé době provozu. Odpojte zařízení ze zásuvky a před dalším zapnutím vyčkejte nejméně 50 minut.
Přístroj náhle přestane pracovat.	Stisknutím vypínače přístroj znovu zapněte. Zkontrolujte napětí v síti. Zapojte kabel zpět do zásuvky.

Popis výrobku



- 02 -

Popis ovladače

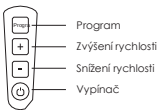

Pokyny k obsluze

Připrava k použití

- Zvolte vhodný masážní uzel.
- Připojte správně adaptér a zapojte jej do zásuvky.

Pokyny k použití

Vypínač

Stisknutím vypínače spustíte vibrace, dalším stisknutím přístroj vypnete.

[+]

Stisknutím tlačítka [+] se rychlost vibrací zvýší. K dispozici je 5 úrovní rychlosti.

[-]

Stisknutím tlačítka [-] se rychlost vibrací sníží.

Tlačítka pro výběr programů

Stisknutím tlačítka pro výběr programů se spustí automatický masážní program. K dispozici je 5 automatických programů (od kompaktního po pomalý).

- 03 -

Masážní oblasti



Záruka a zákaznická podpora

S dotazy a žádostmi o asistenci či podporu, případně s reklamacemi v záruční lhůtě nás můžete kontaktovat na některé z adres uvedených níže dle vašeho regionu. Nezapomeňte uvést číslo objednávky přidělené

Web: www.naipocare.com

E-mail: support@naipocare.com

*Poznámka: Společnost Naipo poskytuje doprovodný servis pouze u výrobků, které byly zakoupeny přímo od ní. Pokud jste si výrobek zakoupili od jiného prodejce, pak v případě reklamaci, záručních oprav či servisu kontaktujte přímo prodejce.

- 04 -