


## návod k použití

# Skládací přenosné masážní křeslo Naipo

typ: MGCHR-001H

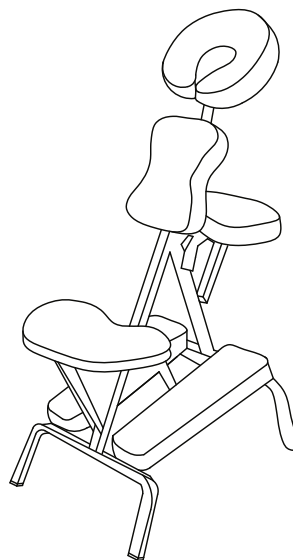

## Úvod

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili skládací přenosné masážní křeslo Naipo. Přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte si jej, abyste se k němu v případě potřeby mohli vrátit. Budete-li potřebovat jakoukoliv pomoc, obraťte se na naše oddělení podpory zákazníků. Při položení dotazu je nezbytné uvést modelové označení přístroje a číslo objednávky.

## Balení obsahuje

- 1 x přenosné masážní křeslo
- 1 x návod k použití
- 1 x transportní taška
- 1 x hlavová opěrka
- 1 x sedací polštář

## Technické údaje

Model	MGCHR-001H
Označení	Skládací přenosné masážní křeslo Naipo


## Důležité bezpečnostní pokyny

1. Provádějte pravidelnou údržbu křesla. Ověřujte si, zda jsou všechny šrouby dotažené a že jsou všechny části křesla úplně a bez poškození.
2. Nepřetěžujte křeslo. Uvažujte celkové zatížení jako hmotnost klienta a dolů směřující tlak masážního terapeuta.
3. Nečistěte povrch výrobku prostředky na bázi alkoholu; mohlo by dojít k poškození výrobku. Čistěte výrobek vodou s mýdlem a pak jej dosucha vytřete.
4. Při používání křesla si ověřte, zda jsou všechny čtyři nohy správně postavené na rovném, pevném povrchu.

## Montáž

### Rozbalení


Vyjměte křeslo z obalu a držte jej ve vzpřímené poloze.

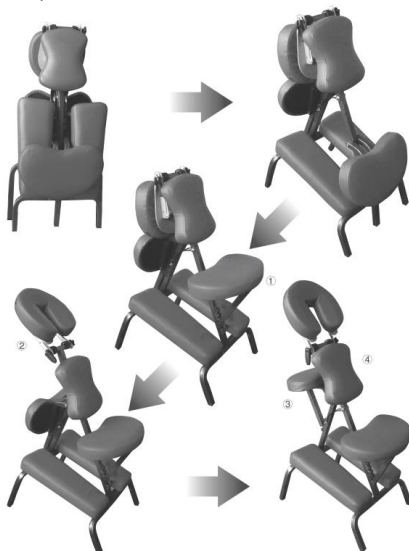


## Nastavení

1. Uchopte přední rám a vytáhněte jej ven. Klekáci podložku nechte klesnout dolů. Po rozložení masážního křesla upevněte sedací polštář. Upravte úhel a výšku křesla tak, aby bylo sedadlo bezpečně zajištěno trubkou, která zapadne do určeného otvoru.

Tip pro uživatele: Sedací polštář je přibalen jako samostatný díl a je třeba jej ručně upevnit. Je vybaven rychloupínacím mechanismem. Příslušenství potřebné pro montáž – šrouby a rychloupínací páka – jsou připraveny v části, kam se upíná podložka sedadla.

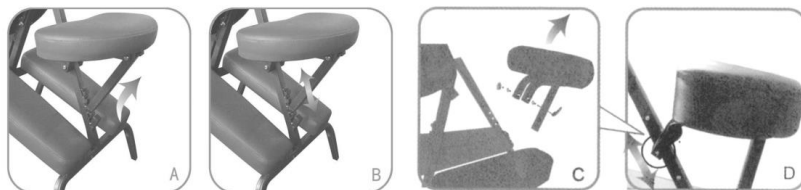

2. Hlavová opěrka je dodávána také samostatně a je potřeba ji připevnit ručně. Nasaďte trubku hlavové opěrky na masážní sedadlo. Její pevnost se nastavuje dotahovacím šroubem. Hlavovou opěrku můžete posouvat nahoru a dolů, když uvolníte šroub v přední části a pak vytažením (nebo ztlačení) upravíte délku trubky. Chcete-li změnit úhel náklonu opěrky, uvolněte rychloupínací mechanismus a po nastavení požadovaného úhlu jej zase dotáhněte pohybem páky na opačnou stranu.

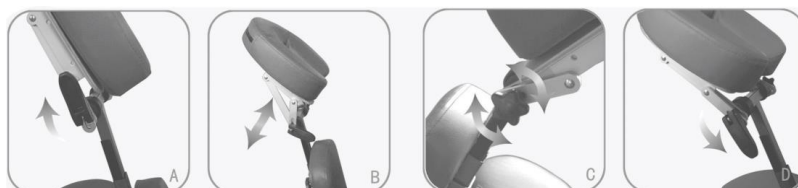

3. Područky je možné zvednout do požadované výšky nasazením podpěry do odpovídající polohy ve stojanu.



4. Výšku hrudní podušky změňte po uvolnění šroubu. Po dokončení úpravy šroub opět dotáhněte.



## Skladování

1. Hrudní podušku a hlavovou opěrku nastavte do nejnižší polohy.
2. Uvolněte područky a nechte je klesnout do vzpřímené polohy.
3. Hlavovou opěrku sklopte úplně dopředu.
4. Zvedněte sedadlo a podpěry kolen tak, aby se zadní rám přesunul co nejbliž přední části rámu.
5. Skladujte v transportní tašce.

## Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

Vyrobeno v Číně.



NEOX GROUP s.r.o. [www.neoxgroup.cz](http://www.neoxgroup.cz)

