

návod k použití

Masážní křeslo Shiatsu s Bluetooth pro celkovou masáž těla

typ: MGCHR-RK2106C

Představení funkcí přístroje

1. Křeslo RK2106C je špičkové, nově vyvinuté masážní křeslo s originálním tvarem nabitě funkcemi.
2. Zádový přičník ve tvaru S kopíruje křivky lidského těla; masážní mechanismus se čtyřmi válci zajišťuje pocit pohodlí.
3. Válení, hnětení, tlak, klepání a masáž hlavy, krku, zad, pasu a boků dokáže odstranit únavu z celého těla.
4. 6 vzduchových polštářů po obou stranách sedadla může pracovat v různých režimech přepínaných stiskem tlačítka a ulevujících od únavy.
5. 24 vzduchových polštářů v prostoru pro nohy a chodidla zajistí vašim holením a chodidlům pulzní tlakovou masáž, která napomáhá krevnímu oběhu v krevních vlásečnicích.
6. Zahřívání pomůže krevnímu oběhu, zbaví únavy a dodá pocit tepla a pohodlí.
7. Horní kryt područek lze libovolně otvírat a zavírat. Při otevření krytu vzduchové polštáře v každé područce zajistí masáž paží. Zavřené slouží jako přirozená podpěra rukou.
8. K ovládání lze použít VFD obrazovku, aktivní přepínací kryt a inteligentní navigační systém se zvukovou a světelnou odezvou. Po otevření krytu si zvolíte svůj oblíbený masážní program.
9. Opěrku pro záda a nohy upravíte elektromotorickým pohonem. Úhel náklonu opěr lze snadno změnit a přizpůsobit tak vašim potřebám.
10. Opěrku pro chodidla lze vytáhnout a zatáhnout v rozsahu 13,5 cm, což je ideální pro osoby s rozdílnou tělesnou výškou.
11. Mechanický pohon a bezhlučná konstrukce se postará o ticho a pocit klidu.

Bezpečnostní upozornění

- Před použitím křesla si pečlivě přečtěte návod k použití, abyste jej mohli správně používat.
- „Bezpečnostní upozornění“ obsahují dva typy informací: varování a upozornění. Než křeslo zapojíte do elektrické zásuvky, přesvědčte se, že jeho vypínač je v poloze „OFF“ (vypnuto).

Varování	Tento symbol značí „varování před možnými následky: smrt, zranění osoby“.		
Upozornění	Tento symbol značí „upozornění, může dojít ke zranění osob nebo škodám na majetku“.		
	Tento symbol značí „zakázané chování a manipulace“.		Tento symbol značí „zákaz demontáže“.
	Tento symbol značí „je nezbytné dodržet pokyny“.		Tento symbol značí „správný způsob zapojení“.

Bezpečnostní upozornění

Varování	
	• Pokud se během činnosti křesla cítíte neobvykle nebo dojde k neobvyklému jevu, poraďte se prosím s lékařem, abyste předešli zranění nebo špatným účinkům na vaše tělo. • Jestliže křeslo nebudete delší dobu používat, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. Zástrčku neodpojujte, dokud nevypnete všechny masáže a hlavní vypínač.
	• Když měníte polohu opěradel pro nohy a záda a prodlužujete opěrku pro chodidla, ujistěte se, že je v okolí křesla dostatek místa (pod, za a před ním). • Masáž hlavy neprovádějte ve větším rozsahu. • Před použitím pečlivě zkontrolujte, zda není poškozená látka křesla. Pokud odhalíte i drobné poškození látky, odpojte křeslo od sítě a nechte si jej opravit; křeslo nepoužívejte, dokud nebude opravené.
	• Děti a nemluvnata nesmí masážní křeslo používat a hrát si na něm; stoupání nebo sezení na opěrce a područkách také není dovoleno. • Osoby, které se nedokáží vyjádřit nebo neumí samy křeslo ovládat, jej nesmí používat, aby nedošlo k nehodě či zranění.
	• Napájecí kabel, zástrčku a zásuvku je zakázáno používat, pokud jsou poškozené nebo mají uvolněný kontakt. • Nepoužívejte jiný způsob napájení než se jmenovitým napětím uvedeným na štítku přístroje, jinak hrozí požár, úraz elektrickým proudem či jiná závada.

Bezpečnostní upozornění

Varování	
	• Poškozený, upravený, zauzlováný, překroucený nebo těžkým břemenem zatížený přívodní kabel, zejména stisknutý pod křeslem, je zakázáno používat. Masážní podušky a další části je zakázáno skladovat ve složeném stavu, jinak může dojít ke zkratu, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
	• V případě jakýchkoli potíží s masážním křeslem si jej nechte opravit odbornou opravnou. Je zakázáno provádět vlastními silami úpravy křesla, jeho demontáž a údržbu. • Je-li přívodní kabel poškozený, nevyměňujte jej sami. Poraďte se s námi nebo s prodejcem.



Upozornění



- Křeslo provozujte na vodorovném pevném místě, abyste předešli pádu.
- Zkontrolujte, zda jsou masážní hlavice ve správné poloze ještě před tím, než do křesla usednete, abyste předešli možným nehodám či zraněním.
- Doporučujeme nepřekračovat maximální provozní dobu křesla 20 minut a dobu pro masáž každého místa 5 minut, abyste se vyhnuli nepříjemným pocitům. Začněte prosím s masážním režimem po malých krocích.
- Vypněte křeslo vypínačem vzadu, abyste předešli tomu, že si s ním budou hrát děti.

Z důvodu bezpečnosti zasunujte zástrčku do zásuvky s uzemněním; zástrčka se zemnicím drátem nesmí mít drát překroucený nebo odstranění, aby se předešlo úrazu elektrickým proudem.



- Netiskněte masážní uzly rukama a nestoupejte na ně nohama.
- Nedávejte ruce mezi zapnuté masážní uzly.
- Nedávejte ruce ani nohy mezi mechanické části přístroje.
- Nestoupejte, nesedejte a nic nedávejte na zadovou opěrku, područky a opěrku na nohy.
- Nepřemisťujte křeslo během jeho činnosti.
- Nedávejte ruce ani hlavu mezi opěrky na nohy nebo do prostoru pod nimi.
- Neprovádějte masáž hlavy, máte-li na hlavě sponku.
- Provádíte-li masáž boků a stehen, nemějte v kapsách tvrdé předměty.
- Nevytahujte zástrčku ani křeslo nevypínejte, je-li v činnosti.

Bezpečnostní upozornění



Upozornění



- Nespěte, když je křeslo v činnosti.
- Osoby pod vlivem alkoholu a ty, které se necítí dobře, nesmí křeslo používat.
- Na elektrické zástrčce nesmí být voda, prach či jiné nečistoty. V takovém případě by hrozil požár, zkrat nebo úraz elektrickým proudem.
- Používat masážní křeslo společně s dalšími zahřívacími předměty, jako je například elektricky vyhřívaná přikrývka, je přísně zakázáno, protože jinak hrozí riziko vzniku požáru.
- Buďte opatrní, aby na zástrčku s masážním křeslem nic neupadlo ani ji nic nepřikrylo a nepoškodilo.
- Křeslo nedávejte na přímé sluneční světlo, ani do blízkosti trouby, topného tělesa apod., jinak může dojít k poškození koženého povrchu.



- Nepoužívejte ani neskladujte křeslo na vlhkých místech, jako je bazén, koupelna apod.
- Křeslo a jeho ovládací prvky udržujte suché. S křeslem nemanipulujte, pokud je vlhké, abyste předešli zkratu a úrazu elektrickým proudem.



- Před opravou nebo čištěním křesla jej odpojte od elektrické sítě. Nedotýkejte se mokřýma rukama zástrčky, abyste předešli zranění elektrickým proudem.
- V případě výpadku elektrického proudu křeslo neprodleně odpojte od sítě, aby nedošlo k nehodě nebo zranění, jakmile bude dodávka proudu obnovena.
- Když manipulujete s přívodním kabelem, držte jej vždy za ZÁSTRČKU, ne za kabel samotný, aby nedošlo k nehodě.



čištění

- Při běžném používání křeslo čistěte suchým hadrem. Není dovoleno používat k čištění chemikálie.
- V případě znečištění prachem a nečistotami křeslo očistěte měkkým hadrem a teplou vodou s neutrálním čisticím prostředkem. Poté jej znovu setřete suchým hadrem a nechte vyschnout. Nečištějte ředidly, alkoholem ani benzínem.



uzemnění
není dovoleno

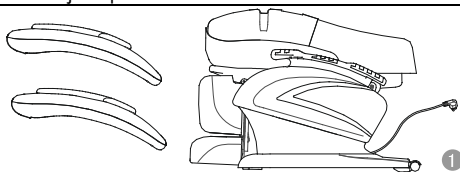
Plynové potrubí: možné riziko výbuchu či požáru.
Telefonní vedení a bleskosvod: možný úraz elektrickým proudem a požár při bouři.
Vodní potrubí: uzemnění je nefunkční, pokud je provedeno v plastu.

Schéma montáže

Křeslo je dodáváno ve dvou balících: jeden obsahuje skládací zadovou opěrku, druhý opěrku zad a područky osazené na křesle.

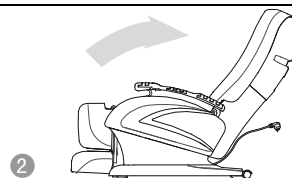
1. krok

Vezměte křeslo, levou a pravou područku vyjměte z kartonového obalu za pomoci nejméně dvou dalších osob. Pokud má již křeslo područky připevněné, není třeba je upevňovat.

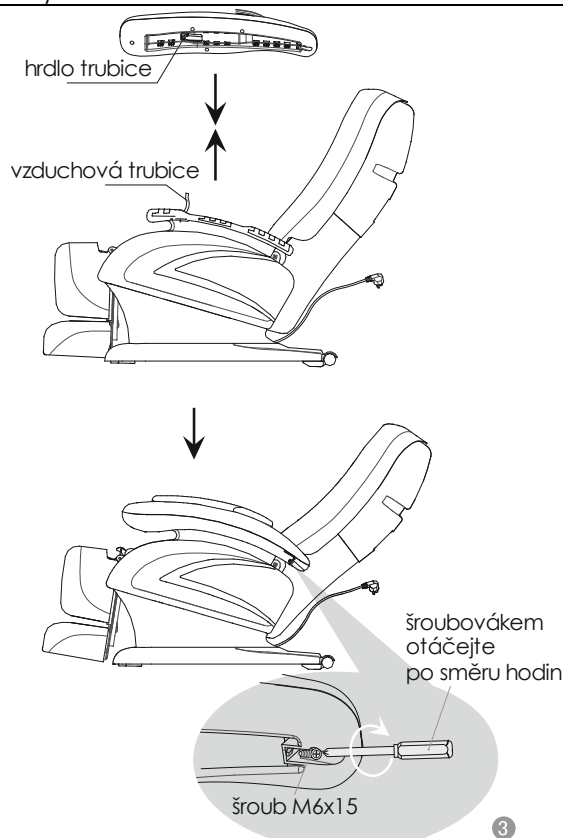


2. krok

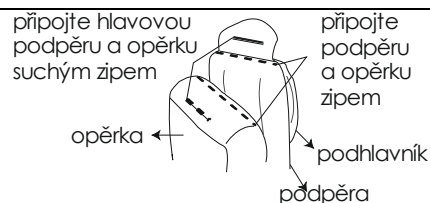
Zvedněte opěrku zad v úhlu zhruba 110 °C. Když dojde k upevnění opěrky zad ve správné poloze, uslyšíte cvaknutí.

**3. krok**

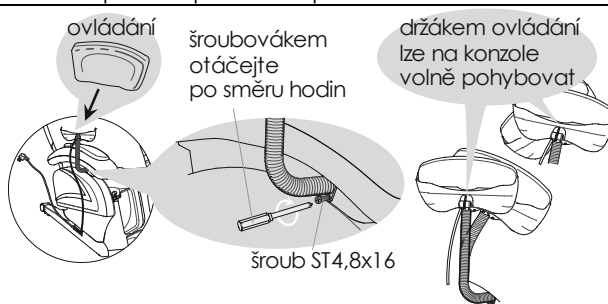
Připojte vzduchovou trubici z těla křesla na hrdlo trubice v krytu područky. Nasadte područku na konzolu područky v těle křesla tak, aby vzduchová trubice řádně seděla v hrdle. Zatlačte kryt područky dopředu a přišroubujte jej. (Stejný postup opakujte pro levou a pravou područku.)

**4. krok**

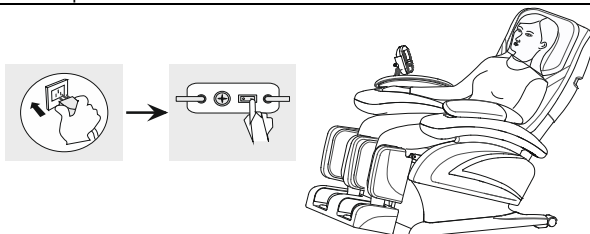
Připojte opěrku a hlavovou podpěru k opěrce zad křesla.

**5. krok**

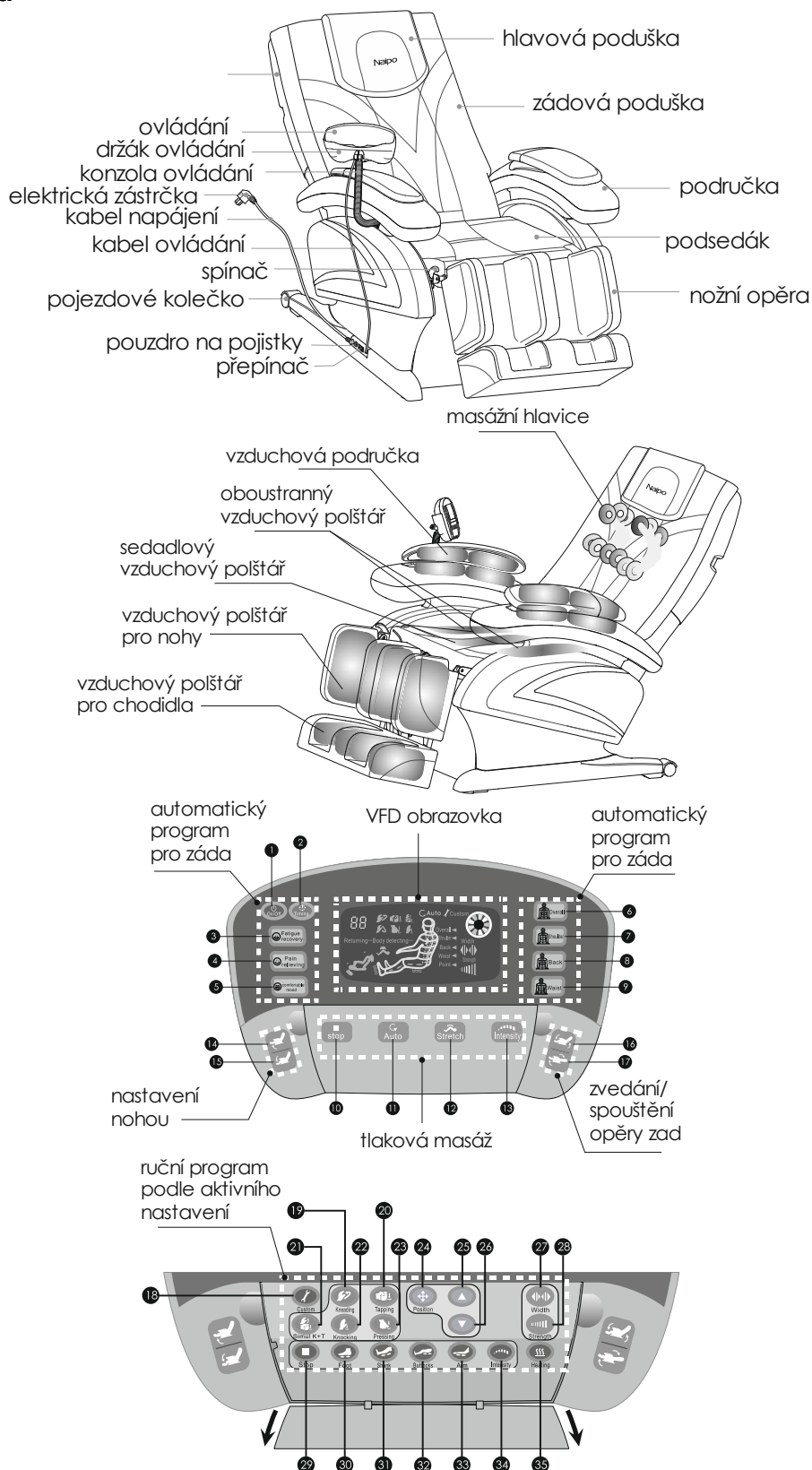
Provedte montáž konzole pro ovládání na pravou područku pomocí třech šroubů. Na konzoli nasadte ovládání.

**6. krok**

Po dokončení montáže připojte křeslo k elektrické síti, zapněte přepínač pod otevřenou pravou područkou, zvolte si požadovanou funkci a užijte si jemnou a pohodlnou masáž.



Vnější části křesla



Použití ovládání

1. Zapněte masážní přístroj hlavním vypínačem. Až bude zapnutý, na displeji se objeví doba provozu 20 minut. Blikat budou ukazatele „úplného běhu“, „ramen“, „zad“, „pasu“. Můžete zvolit automatický program klepnutím na některé z tlačítek „úplného běhu“, „ramen“, „zad“, „pasu“. Poté začnou blikat ukazatele „zbavení únavy“, „úleva od bolesti“ a „pohodlná nálada“. Vyberete jeden z nich a stroj začne pracovat. Po otevření krytu se objeví obrazovka, ze které můžete stiskem tlačítek volit ručně jednotlivé programy. Až křeslo vypnete, navolený program se automaticky uloží.
2. V průběhu činnosti tímto tlačítkem nastavíte dobu běhu křesla na 10, 20 nebo 30 minut.
3. Během činnosti stiskem tohoto tlačítka zvolíte funkci „zbavení únavy“.
4. V automatickém režimu si tímto tlačítkem zvolíte funkci „úleva od bolesti“.
5. V automatickém režimu si tímto tlačítkem zvolíte funkci „pohodlná nálada“.

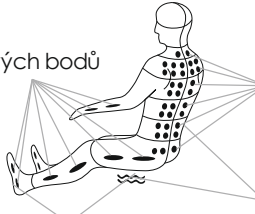


	6. Při zapnutém křesle tímto tlačítkem zvolíte automatický běh masáže horní části těla.
	7. Při zapnutém křesle tímto tlačítkem zvolíte automatický běh masáže ramen.
	8. Při zapnutém křesle tímto tlačítkem zvolíte automatický běh masáže zad.
	9. Při zapnutém křesle tímto tlačítkem zvolíte automatický běh masáže pasu.
	10. Při zapnutém křesle tímto tlačítkem zastavíte tlakovou masáž boků, nohou, chodidel a paží.
	11. Při zapnutém křesle tímto tlačítkem zvolíte automatickou tlakovou masáž. Na displeji se objeví „AU“.
	12. V režimu automatické tlakové masáže stiskem tohoto tlačítka zvolíte/zrušíte funkci protahování nohou.
	13. V režimu tlakové masáže tímto tlačítkem nastavíte intenzitu masáže vzdušnými polštáři.
	14. Stiskem tohoto tlačítka začnete zvedat podpěru nohou. Po uvolnění tlačítka zvedání ustane.
	15. Stiskem tohoto tlačítka začnete spouštět podpěru nohou. Po uvolnění tlačítka spouštění ustane.
	16. Stiskem tohoto tlačítka začnete zvedat podpěru zad a spouštět podpěru nohou. Po uvolnění tlačítka zvedání a spouštění ustane.
	17. Stiskem tohoto tlačítka začnete spouštět podpěru zad a zvedat podpěru nohou. Po uvolnění tlačítka zvedání a spouštění ustane.
	18. Při zapnutém křesle tímto tlačítkem zvolíte ručně oblíbený masážní režim.
	19. V režimu vlastní masáže tímto tlačítkem zahájíte valivou masáž.
	20. V režimu vlastní masáže tímto tlačítkem zahájíte poklepávací masáž.
	21. V režimu vlastní masáže tímto tlačítkem zahájíte valivou a poklepávací masáž.
	22. V režimu vlastní masáže tímto tlačítkem zahájíte klepací masáž.
	23. V režimu vlastní masáže tímto tlačítkem zahájíte tlakovou masáž.

Použití dálkového ovládání

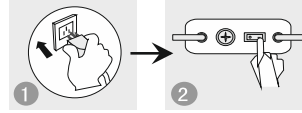
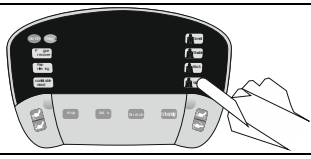
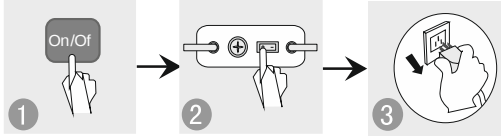
	24. V režimu vlastní masáže tímto tlačítkem zvolíte polohu masírovaného místa: celé tělo, ramena, záda, pas a určitá poloha.
	25. V režimu vlastní masáže tímto tlačítkem vyberete určitou polohu. Po stisku zvednete místo masáže o něco výše.
	26. V režimu vlastní masáže tímto tlačítkem vyberete určitou polohu. Po stisku zvednete místo masáže o něco níže.
	27. V režimu vlastní masáže, když máte zvolenu funkci poklepávání, tlaku, klepání, tímto tlačítkem upravíte rozteč mezi dvěma sadami válců.
	28. V režimu vlastní masáže, když máte zvolenu funkci poklepávání, hnětení + poklepávání, klepání, upravíte tímto tlačítkem intenzitu masáže.
	29. Stiskem tohoto tlačítka zastavíte tlakovou masáž chodidel, bérce a paží.
	30. V zapnutém režimu stiskem tohoto tlačítka zahájíte/ukončíte tlakovou masáž chodidel.
	31. V zapnutém režimu stiskem tohoto tlačítka zahájíte/ukončíte tlakovou masáž bérce.
	32. V zapnutém režimu stiskem tohoto tlačítka zahájíte/ukončíte tlakovou masáž boků.
	33. V zapnutém režimu stiskem tohoto tlačítka zahájíte/ukončíte tlakovou masáž paží.
	34. Při zapnuté tlakové masáži stiskem tohoto tlačítka ovládáte intenzitu přítlaku na chodidla, bérce, boky a paže.
	35. V režimu zapnutého křesla stiskem tohoto tlačítka zapnete/vypnete vyhřívání chodidel a pasu.
	Digitální displej: V pohotovostním režimu uvádí stav „_ _“, jinak zobrazuje provozní dobu. Je-li zapnuta tlaková masáž, po stisku tlačítka „automaticky“ zobrazuje „AU“. Po stisku tlačítka intenzity zobrazuje „E1“, „E2“, „E3“, „E4“. Je-li přístroj v chybovém režimu, objevuje se na displeji „Er“.

funkce	 — hnětení  — klepání  — simul H+K  — tlak  — údery	 automaticky  vlastní nastavení	
		 šířka N: úzký M: střední W: široký	 síla
 oranžová – zotavení z únavy zelená – úleva od bolesti modrá – pohodlí		 nahoru/ dolů nahoru/ dolů	

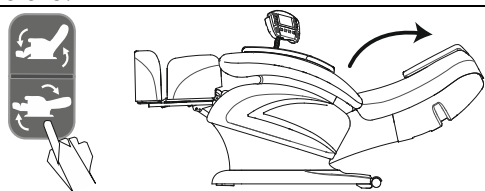
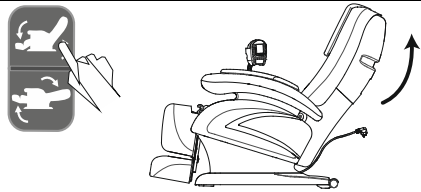
poloha tlakových bodů  poloha masážních bodů zahřívání chodidel a pasu zahřívání sedáku a pasu	
 protažení nohou	celkově ◀ ramena ◀ záda ◀ pas ◀ místo ◀

Provozní režimy

• Uvedení do provozu

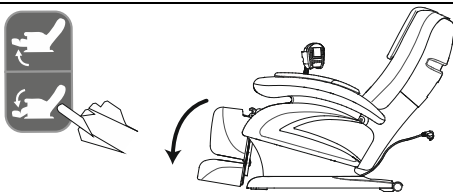
1. krok: Zapnutí 1. Zástrčku vsuňte do zásuvky. Hlavní vypínač naspodu pravé područky zapněte a přístroj se přepne do pohotovostního režimu.	
	2. krok: Masáž Zvolte masážní funkci dle výše uvedených pokynů.
3. krok: Vypnutí 1. Stiskněte tlačítko vypínače a stroj vypněte. 2. Vypněte hlavní vypínač naspodu pravé područky. Válečky zůstanou ve skladovací poloze. 3. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.	
	

• Poloha opěradla zad

► Sklonění opěradla Stiskem tlačítka „“ na ovladači se začne opěradlo pohybovat dolů a současně podnožka nahoru. Po uvolnění tlačítka zůstanou opěry ve stanovené poloze.	
	
◀ Zvednutí opěradla Stiskem tlačítka „“ na ovladači se začne opěradlo pohybovat nahoru a současně podnožka dolů. Po uvolnění tlačítka zůstanou opěry ve stanovené poloze.	
	

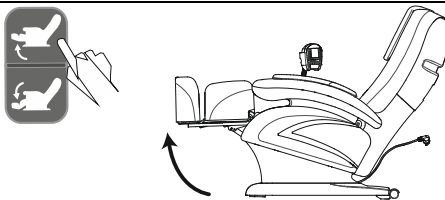
Provozní režimy

• Sklopení/zvednutí podnožky

► Sklonění podnožky Stiskem tlačítka „“ na ovladači se podnožka začne pohybovat pomalu dolů. Po uvolnění tlačítka zůstane opěr nohou ve stanovené poloze.	
	

◀ Zvednutí podnožky

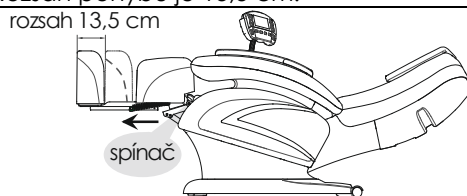
Stiskem tlačítka „“ na ovladači se podnožka začne pohybovat pomalu nahoru. Po uvolnění tlačítka zůstane opěr nohou ve stanovené poloze.



• Vysunutí/zasunutí opěry pro chodidla

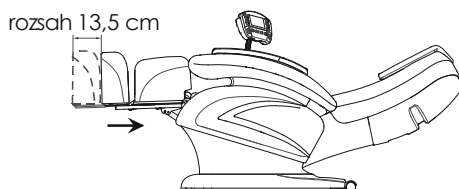
▶ Vysunutí opěry

Stiskem spínače vpřed na pravé podnožce vzadu nastavíte požadovanou vzdálenost vysunutí opěry. Opěra po uvolnění spínače zůstane ve stanovené poloze. Rozsah pohybu je 13,5 cm.



◀ Zatažení opěry

Stiskem spínače vzad na pravé podnožce vzadu nastavíte požadovanou vzdálenost vysunutí opěry. Opěra po uvolnění spínače zůstane ve stanovené poloze. Rozsah pohybu je 13,5 cm.

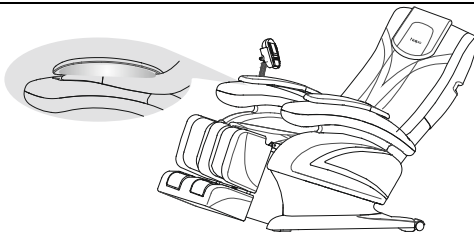


Zajistěte, aby nikdo a nic nebylo v okolí křesla v dosahu pohybu opěry pro záda a nohy, aby nedošlo k nežádoucímu zranění nebo poškození majetku. Když upravujete polohu opěry zad, dávejte pozor na mezeru mezi opěrou zad a područkami.

Provozní režimy

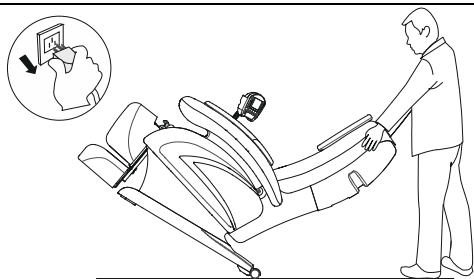
• Masáž paží

Otevřete horní kryt područek, položte na ně ruce a stiskněte tlačítko „auto“ na ovladači nebo tlačítko „paže“ u aktivního programu, abyste si mohli vychutnat tlakovou masáž.



• Přemísťování

Vypněte křeslo a odpojte jej od sítě (křeslo je vhodnější přemísťovat ve složeném stavu, aby se předešlo poškození zádové opěrky). Uchopte křeslo ze stran za zádovou opěrku, jak je vidět na obrázku, a přemísťujte jej opatrně za pomoci koleček.



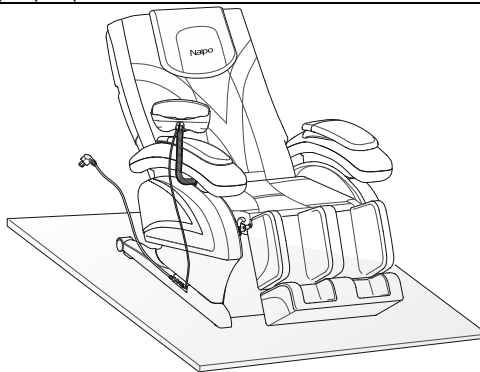
Poznámka

Přívodní kabel by měl být položen stočený na sedadle, aby se během přemísťování nepoškodil. Křeslo pokládejte opatrně, aby nedošlo hrubým zacházením k poškození některých jeho částí. Nepoužívejte kolečka na nerovném terénu.

Netlačte křeslo po dřevěné podlaze, aby ji kolečka nepoškodila rýhami. V případě potřeby zvedněte křeslo ve dvou nebo více lidech.

• Doporučení

S ohledem na váhu křesla může dlouhodobým tlakem na jednom místě poškodit podlahu. Doporučujeme proto podložit jej kobercem nebo něčím měkkým, aby byla podlaha chráněna.



Otázky, odpovědi a řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení problémů
Po zapnutí křeslo nefunguje.	Zkontrolujte, zda je zapnuté. Není zvolena žádná funkce. Zástrčka je v zásuvce uvolněná.	Přepněte hlavní vypínač. Zvolte masírovací funkci. Zkontrolujte připojení zástrčky v síťové zásuvce.
Při provozu křesla je slyšet pípnutí.	Je to zvuk vzduchové pumpy, motoru a mechanických částí.	Normální zvuk, není třeba věnovat mu pozornost.
Zvuk je za provozu náhle hlasitější.	Zkontrolujte, zda to není dlouhou dobou činnosti.	Vypněte křeslo, aby zhruba půl hodiny bylo bez proudu, pak jej zkuste znovu použít.
Masáž se náhle přeruší.	Vypršel nastavený čas.	Vypněte křeslo, aby zhruba půl hodiny bylo bez proudu, pak jej zkuste znovu použít.
Ani zádovou, ani nožní opěrku nelze posunout.	Zkontrolujte možné překážky. Křeslo je přetížené. Z bezpečnostních důvodů může křeslo v některých případech automaticky přerušit svoji činnost.	Odstraňte překážky. Vypněte křeslo, aby zhruba půl hodiny bylo bez proudu, pak jej zkuste znovu použít.
Křeslo nelze vrátit do jeho původní pozice.	Přetížení. Vypršel čas.	Vypněte křeslo, aby zhruba půl hodiny bylo bez proudu, pak jej zkuste znovu použít.
Ukazatel napájení se nerozsvítí, když je křeslo zapnuté spínačem na pravé područce.	Zkontrolujte zástrčku a zásuvku, zda nejsou poškozeny. Zkontrolujte, zda není přepálená pojistka.	Ověřte správný kontakt zástrčky v zásuvce. Vyměňte pojistku za jinou stejného typu a parametru.

Poznámka!

Pokud nejsou příčiny výše uvedené, vypněte křeslo vypínačem na pravé područce, odpojte přívodní kabel a spojte se s prodejcem nebo odbornou opravou.

Označení	masážní křeslo Shiatsu s Bluetooth pro celkovou masáž těla
Typ	MGCHR-RK2106C
Vstupní napětí	střídavých 110V, střídavých 220V ~ 240V 50 / 60 Hz
Pracovní napětí	110 V stejnosměrných
Příkon	260 W
hmotnost čistá/hrubá	80/94 kg
Rozměry obalu (mm)	1160 x 795 x 850
Bezpečnost konstrukce	Třída I

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webových stránek <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

Vyrobeno v Číně



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz