


návod k použití

Přenosná hloubková tkáňová masážní pistole

typ: MGPC-007

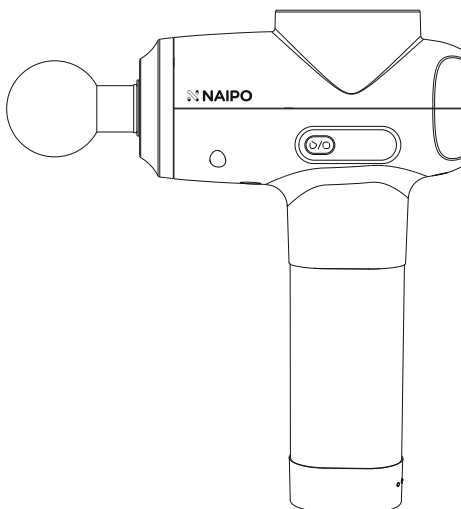

Úvod

Děkujeme, že jste si koupili hloubkovou tkáňovou masážní pistoli NAIPO. Přečtěte si prosím celý tento návod k obsluze a údržbě a uschovejte si jej pro pozdější použití. Potřebujete-li pomoc s výrobkem, obraťte se na oddělení naší zákaznické podpory – viz kontakty.

Obsah balení

Označení	Množství
masážní pistole	1
masážní aplikátor	5
přenosný kufřík	1
síťový adaptér	1
návod k použití	1



Důležité bezpečnostní pokyny

- Masírujte pouze ty oblasti, které nejsou oteké či zraněné. Nepoužívejte přístroj, pocítíte-li bolest nebo nepohodlí.
- Nepoužívejte na hlavu, kosti a pevné oblasti těla.
- Nedoporučujeme provádět masáž dlouhodobě v jedné oblasti. Jakmile cítíte během používání bolest nebo nepohodlí, přestaňte přístroj používat.
- Masírujte pouze čisté a suché oblasti. Přitlačte a pohybujte jemně po pokožce.
- Prsty, vlasy a další části těla udržujte mimo dosah vibrační osy přístroje, aby nedošlo k jejich zachycení.
- Nepoužívejte na nebo v očích, zubech, hrudních protézách, genitáliích nebo umělých končetinách.
- Nepoužívejte na místech, kde by mohlo dojít ke vzniku zlomeniny.
- Cítíte-li při používání neustálou bolest, přestaňte přístroj používat a neprodleně vyhledejte lékaře.
- Výrobek není lékařský nástroj a neslouží k lékařským účelům.
- Než budete výrobek používat, zkontrolujte motor a síťový adaptér. Je-li některá část poškozená, spojte se s výrobcem nebo vyhledejte odbornou opravu.

Varování

- Zařízení nepoužívejte, když se nabíjí.
- Žádné předměty nevkládejte do ventilačních otvorů.
- Neponořujte výrobek do vody, ani nedovolte, aby voda vnikla do přístroje ventilačními otvory.
- Nepouštějte na zem a nepoužívejte nesprávně.
- Zkontrolujte, zda jsou zařízení, baterie a síťový adaptér funkční vždy, než začnete přístroj používat.
- Výrobek žádným způsobem neměňte a neupravujte.
- Nenechávejte výrobek bez dozoru, když se nabíjí nebo je zapnutý.
- Nabíjejte přístroj POUZE originálním síťovým adaptérem.
- Nedávejte zařízení do ohně.
- Nepoužívejte přístroj nepřetržitě delší dobu než 1 hodinu, aby nedošlo k přehřátí. Než budete s přístrojem znovu pracovat, nechte jej po 30 minut vypnutý.

Popis výrobku

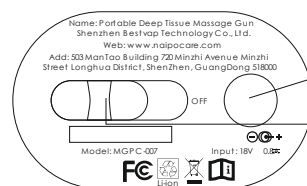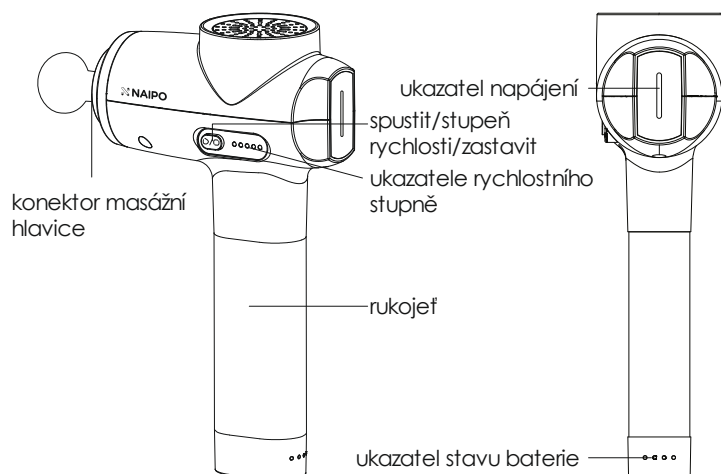

zadní pro nabíjení
stejným proudem
zapnout/vypnout

Pokyny k používání

Nabíjení

- Před prvním použitím přístroj zcela nabijte.
- Nabíjení zahájíte tak, že připojíte koncovku z nabíječe do nabíjecího konektoru v přístroji a síťový adaptér připojíte do elektrické zásuvky.
- Během nabíjení pravidelně blikají ukazatele stavu baterie.
- Jakmile se všechny ukazatele stavu baterie rozsvítí, je nabíjení dokončeno.

Provoz přístroje

- Montáž masážních aplikátorů: Vypněte přístroj. Přitiskněte masážní aplikátor na propojovací konektor. Aplikátor odpojte tažením směrem od konektoru. (Poznámka: Na aplikátor při montáži/demontáži tlačte/táhněte v přímém směru, neotáčejte.)
- Přístroj zapnete vypínačem naspodu přepnutím do polohy ON. Přístroj vypnete přepnutím do polohy OFF.
- Je-li přístroj zapnutý, stiskem „“ zapnete masážní program. Stiskem tlačítka „“ můžete přepnout 0–5 stupeň.

Dlouhým stiskem „“ na 2 sekundy masážní program zastavíte. Kontrolka oznamuje příslušnou úroveň síly (1–5).

- Masáž příslušných míst provádějte s rozdílnou intenzitou.

Údržba, čištění a skladování

- Přístroj čistěte vlhkým ručníkem a přebytečnou vodu setřete suchým hadrem.
- Nebudete-li přístroj dlouhou dobu používat: Vložte přístroj zpět do původního obalu a skladujte jej v suchém prostředí. Jedenkrát měsíčně přístroj nabíjejte, aby nedošlo k poškození baterie.
- Nesnažte se přístroj rozebírat.
- Aby nová baterie dosáhla optimálního výkonu, plně ji nabijte a vybijte opakovaně alespoň třikrát.

Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Nefunguje.	Vypínač naspodu přístroje není v poloze zapnuto.	Přepínač dejte do polohy ON. Ukazatel napájení (červený) a ukazatel baterie (modrý) by se měly rozsvítit.
	Slabá baterie.	Baterii nabijte a zařízení znovu zapněte.
Zařízení přestalo pracovat, když narazilo na odpor.	Zapnula se nadproudová ochrana zařízení.	Odpojte a znovu zapojte přístroj a znovu jej zapněte.

Technické údaje

Model	MGPC-007
Označení	Přenosná hloubková tkáňová masážní pistole
Napájení	18 V, 0,8 A
životnost baterie (na 1 nabití) Charge)	5–7 hodin
Doba nabíjení	≈3 hodiny
Automatické zastavení	≈10 minut
Baterie	stejnoseměrná 14,8 V 2500 mAh
Oblasti masáže	celé tělo

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webových stránek <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

Vyrobeno v Číně



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz