


návod na použitie

Prenosná hĺbková tkaninová masážna pištoľ typ: MGPC-007

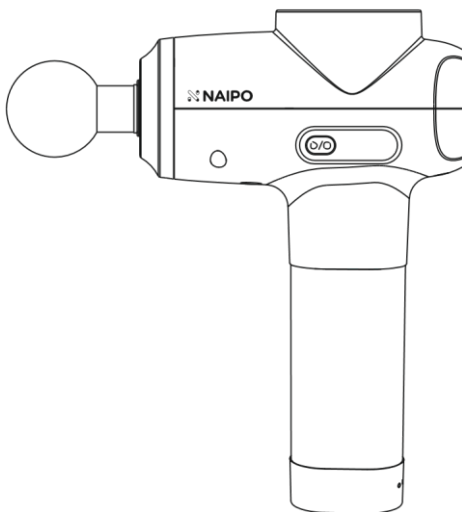

Úvod

Ďakujeme, že ste si kúpili hĺbkovú tkaninovú masážnu pištoľ NAIPO. Prečítajte si prosím celý tento návod na obsluhu a údržbu a uschovajte si ho na neskôršie použitie. Ak potrebujete pomoc s výrobkom, obráťte sa na oddelenie našej zákazníckej podpory – viď kontakty.

Obsah balenia

Označenie	Množstvo
masážna pištoľ	1
masážny aplikátor	5
prenosný kufrík	1
sieťový adaptér	1
návod na použitie	1



Dôležité bezpečnostné pokyny

- Masírujte iba tie oblasti, ktoré nie sú opuchnuté či zranené. Nepoužívajte prístroj, pokiaľ pociťujete bolesť alebo nepohodlie.
- Nepoužívajte na hlavu, kosti a pevné oblasti tela.
- Neodporúčame vykonávať masáž dlhodobo v jednej oblasti. Akonáhle cítite behom používania bolesť alebo nepohodlie, prestaňte prístroj používať.
- Masírujte iba čisté a suché oblasti. Pritlačte a pohybujte jemne po pokožke.
- Prsty, vlasy a ďalšie časti tela udržiavajte mimo dosah vibračnej osy prístroja, aby nedošlo k ich zachyteniu.
- Nepoužívajte na alebo v očiach, zuboch, hrudných protézach, genitáliách alebo umelých končatinách.
- Nepoužívajte na miestach, kde by mohlo dôjsť ku vzniku zlomeniny.
- Ak cítite pri používaní neustálu bolesť, prestaňte prístroj používať a neodkladne vyhľadajte lekára.
- Výrobok nie je lekársky nástroj a neslúži na lekárske účely.
- Pred tým ako budete výrobok používať, skontrolujte motor a sieťový adaptér. Ak je niektorá časť poškodená, spojte sa s výrobcom alebo vyhľadajte odbornú opravu.


Varovanie

- Zariadenie nepoužívajte, pokiaľ sa nabíja.
- Žiadne predmety nevkladajte do ventilačných otvorov.
- Neponárajte výrobok do vody, ani nedovoľte, aby voda vnikla do prístroja ventilačnými otvormi.
- Nepúšťajte na zem a nepoužívajte nesprávne.
- Skontrolujte, či sú zariadenie, batérie a sieťový adaptér funkčné vždy, skôr ako začnete prístroj používať.
- Výrobok žiadnym spôsobom nemeňte a neupravujte.
- Nenechávajte výrobok bez dozoru, pokiaľ sa nabíja alebo je zapnutý.
- Nabíjajte prístroj iba s originálnym sieťovým adaptérom.
- Nedávajte zariadenie do ohniska.
- Nepoužívajte prístroj nepretržite dlhšiu dobu ako 1 hodinu, aby nedošlo k prehriatiu. Skôr ako budete s prístrojom znovu pracovať, nechajte ho po 30 minút vypnutý.

Popis výrobku

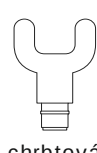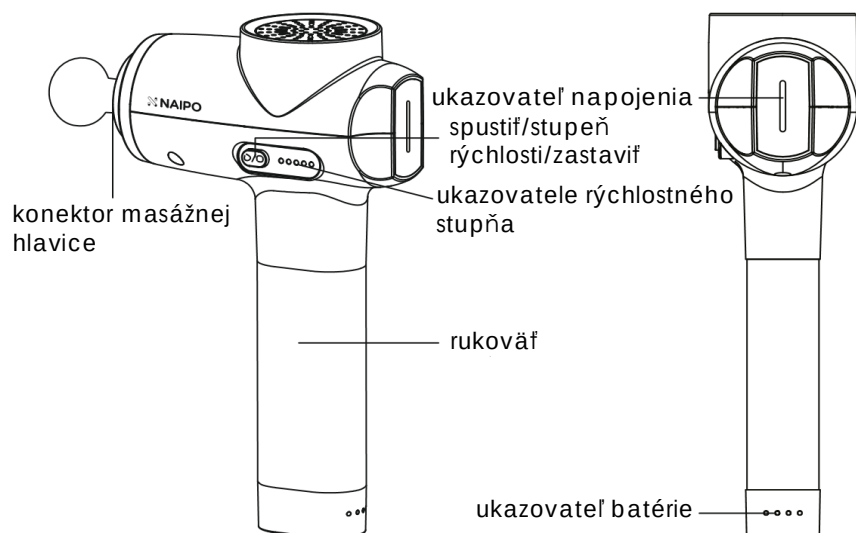

chrbtová

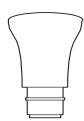


plochá




guľová



vankúšová

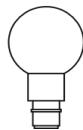

gulatá

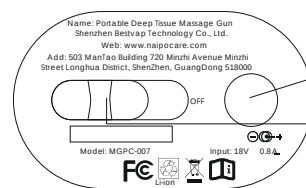

otvor na nabíjanie
rovno smerným prúdom

zapnúť/vypnúť

Pokyny na používanie

Nabíjanie

- Pred prvým použitím prístroj úplne nabite.
- Nabíjanie začnete tak, že pripojíte koncovku z nabíjača do nabíjacieho konektoru v prístroji a sieťový adaptér pripojíte do elektrickej zásuvky.
- Počas nabíjania pravidelne blikajú ukazovatele stavu batérie.
- Akonáhle sa všetky ukazovatele stavu batérie rozsvietia, je nabíjanie dokončené.

Používanie prístroja

- Montáž masážnych aplikátorov: Vypnite prístroj. Pritlačte masážny aplikátor na prepojovací konektor. Aplikátor odpojte ťahaním smerom od konektoru. (Poznámka: Na aplikátor pri montáži/demontáži tlačte/ťahajte v priamom smere, neotáčajte.)
- Prístroj zapnete vypínačom naspodku prepnutím do polohy ON. Prístroj vypnete prepnutím do polohy OFF.
- Ak je prístroj zapnutý, stlačením „“ zapnete masážny program. Stlačením tlačidla „“ môžete prepnúť 0–5 stupeň.

Dlhým stlačením „“ na 2 sekundy masážny program zastavíte. Kontrolka oznamuje príslušnú úroveň sily (1–5).

- Masáž príslušných miest vykonávajte s rozdielnou intenzitou.

Údržba, čistenie a skladovanie

- Prístroj čistíte vlhkým uterákom a nadbytočnú vodu zotrite suchou handričkou.
- Pokiaľ nebudete prístroj dlhšiu dobu používať: Vložte prístroj naspäť do pôvodného obalu a skladujte ho v suchom prostredí.
Jedenkrát mesačne prístroj nabíjajte, aby nedošlo k poškodeniu batérie.
- Nesnažte sa prístroj rozbrať.
- Aby nová batéria dosiahla optimálny výkon, plne ju nabite a vybité opakovane aspoň trikrát.

Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Nefunguje.	Vypínač naspodku prístroja nie je v polohe zapnuté.	Vypínač dajte do polohy ON. Ukazovateľ napájania (červený) a ukazovateľ batérie (modrý) by sa mali rozsvietiť.
	Slabá batéria.	Batériu nabite a zariadenie znovu zapnite.
Zariadenie prestalo pracovať, keď narazilo na odpor.	Zapla sa nadprúdová ochrana zariadenia.	Odpojte a znovu zapojte prístroj a znovu ho zapnite.

Technické údaje

Model	MGPC-007
Označenie	Prenosná hĺbková tkaninová masážna pištoľ
Napájanie	18 V, 0,8 A
Životnosť batérie (na 1 nabitie)	5–7 hodín
Doba nabíjania	≈3 hodiny
Automatické zastavenie	≈10 minút
Batérie	rovno smerná 14,8 V 2500 mAh
Oblasti masáže	celé telo

Záruka a služby zákazníkom

Ak potrebujete pomoc vyriešiť problémy s používaním výrobku, využijte ďalšie služby apod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>
Záručná lehota sú 2 roky od dátumu nákupu.

Vyrobené v Číne



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz