

## MASÁŽNY PRÍSTROJ NA KRK A CHRBTICU

Model: oCuZen S



### DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní výrobku je potrebné dodržiavať nižšie uvedené základné bezpečnostné pokyny. Tento návod si ponechajte po dobu vlastníctva výrobku, aby ste si pokyny mohli pripomenúť.



### NEBEZPEČENSTVO

Ako znížiť riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom, popálením a požiaru:

Zástrčku napájacieho kábla výrobku vždy okamžite po skončení používania výrobku a pred jeho čistením vytiahnite z elektrickej zásuvky. Sami výrobok nerozoberajte.

### VAROVANIE

Ako znížiť riziko popálenín, požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zraneniam osôb:



Nepoužívajte výrobok pod prikrývkou a vankúšom; umožnite prirodzené uvoľňovanie tepla, aby sa výrobok neprehrieval, čo by mohlo viesť k požiaru, elektrickému skratu či zraneniam.



Neodpojujte od zásuvky ťahaním za kábel.



Výrobok používajte výhradne s dodávaným sieťovým adaptérom a iba v rozvodnej sieti s napätím uvedeným na štítku prístroja.



Nepoužívajte na miestach, kde sa používajú žeraviny alebo kam sa dodáva kyslík.



Nepoužívajte na miestach s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľne) a vysokou teplotou. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k inému bezpečnostnému ohrozeniu.



Nevystavujte vysokým teplotám, nenechávajte výrobok vo vozidle.



Nepoužívajte vo vonkajších priestoroch.

Upozornenie – Pred tým, ako začnete výrobok používať, pozorne si prečítajte všetky pokyny.



Tento výrobok je určený na vykonávanie osobných masáží. Nejedná sa o výrobok na lekárske účely a nie je ho možné používať k zárobkovým činnostiam.



Tento výrobok používajte výhradne na účely, ktoré sú popísané v tomto návode.



Ak výrobok nepoužívate, vypnite ho.



Výrobok pripojený k elektrickej sieti nesmie byť ponechaný bez dozoru. Odpojte ho od siete, keď ho nepoužívate.



Výrobok je vybavený vyhrievacou funkciou. Ľudia citliví na teplo by pri používaní výrobku mali byť opatrní.



Prívodný kábel nesmie prísť do styku s horúcimi povrchmi, aby nedošlo k vážnym popáleninám.



Špeciálnu pozornosť venujte častiam, ktoré sú najviac namáhané. Poškodené súčasti okamžite vymeňte alebo výrobok prestaňte používať až do vykonania opravy.



Nepoužívajte výrobok, ak má poškodený prívodný kábel alebo zástrčku, nepracuje obvyklým spôsobom, pokiaľ spadol na zem, bol inak poškodený alebo spadol do vody.



Prestaňte výrobok používať, pokiaľ počas používania pocítujete nepohodu alebo bolesť.



Prestaňte výrobok používať, pokiaľ nefunguje obvyklým spôsobom.



Nepoužívajte výrobok počas jazdy a dodržujte všetky platné dopravné predpisy.



Tento výrobok nie je vhodný pre deti a deti by sa nemali s výrobkom hrať.

Pokiaľ sa vás týkajú nižšie uvedené situácie, poraďte sa pred použitím prístroja so svojim lekárom.



Ľudia s fyzickými obmedzeniami.



Ľudia s psychickými problémami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí.



Ľudia s chronickými ochoreniami.



Tehotné ženy.



Ženy v období menštruácie.




Ľudia s fyziologickými alebo inými zdravotnými komplikáciami.




Ľudia s kardiostimulátormi alebo s obavami o svoje zdravie.


## OBLASTI MASÁŽE

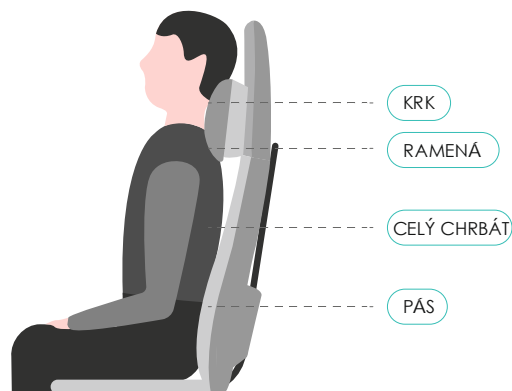


## SÚČIASKY VÝROBKU

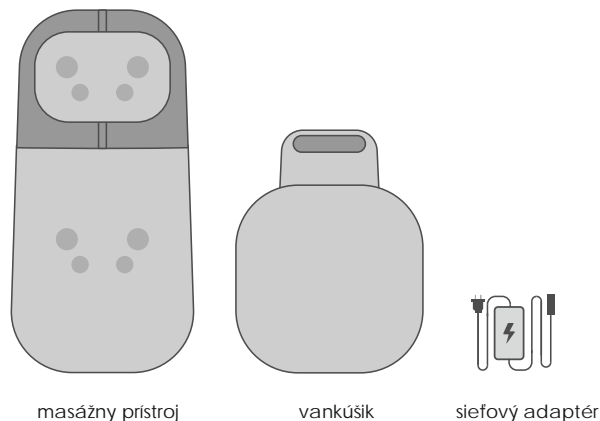

## VLASTNOSTI VÝROBKU

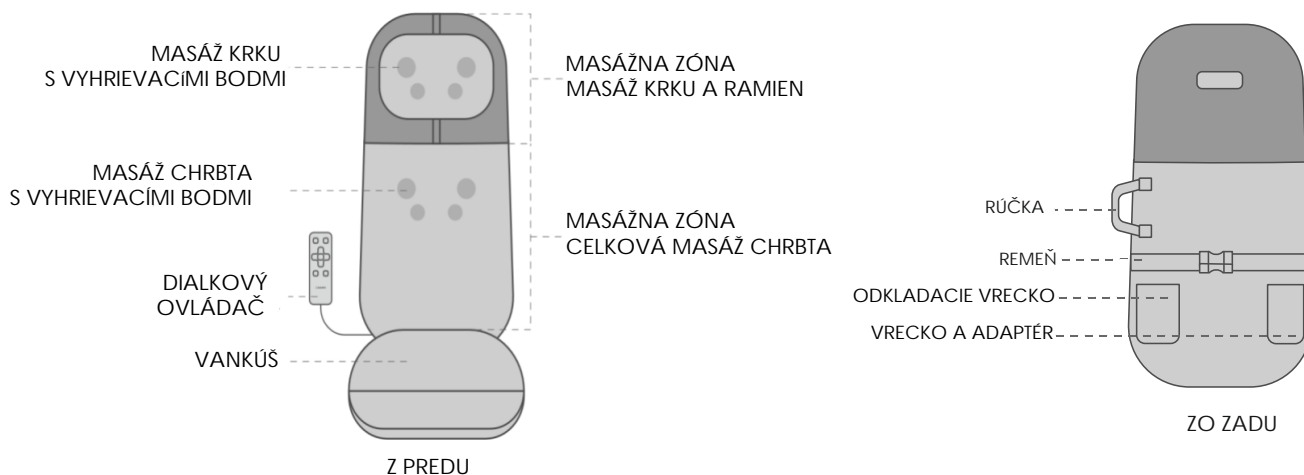

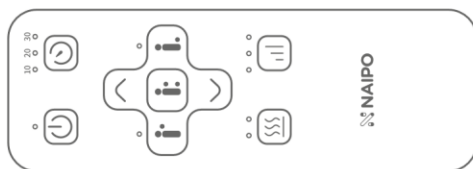


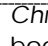





# NÁVOD NA POUŽÍVANIE






## Ako výrobok používať


Prípojte výrobok k elektrickej sieti. Výrobok sa prepne do pohotovostného režimu.

-  **Vypínač:** Keď je výrobok v pohotovostnom režime, stlačte toto tlačidlo. Ukazovateľ napájania sa rozsvieti na červeno. Je zapnutý prednastavený režim masáže: krk a chrbtica s „nízkou“ úrovňou a „vysokým“ vyhrievaním.
-  **Časovač:** Výrobok má po zapnutí nastavený časovač na 10 minút. Stlačením tohoto tlačidla meníte dobu masáže: 10/20/30 minút. Po uplynutí zvolenej doby sa výrobok vypne.
-  **Krk:** Ak je výrobok zapnutý, stlačením tohoto tlačidla upravíte nastavenie krčného vankúšika: dlhým stlačením tlačidiel hore/dolu  upravíte polohu vankúšika hore/dolu. Po pustení tlačidla pohyb vankúšika prestane.
-  **Chrbát:** Ak je výrobok zapnutý, stlačením tohoto tlačidla zahájite úpravu masáže chrbta alebo režim určitého bodu v chrbtovej časti: Dlhým stlačením tlačidiel hore/dolu  upravujete miesto masáže hore a dolu. Po uvoľnení tlačidla sa masážne uzly prestanú pohybovať a bude pokračovať masáž chrbta na zvolenom mieste.
-  **Automatika:** Po zapnutí výrobku sa automaticky spustí masáž krku a chrbta. Ak budete používať aj ďalšie režimy masáže, stlačením tohoto tlačidla obnovíte automatické prednastavenie.
-  **Vyhrievanie:** Po zapnutí výrobku je automaticky zapnutá „vysoká“ úroveň vyhrievania. Stlačením tlačidla meníte úroveň vyhrievania. Postupne sa prepína vysoká úroveň, nízka úroveň a vypnutie vyhrievania.
-  **Rýchlosť:** Po zapnutí výrobku stlačením tohto tlačidla meníte rýchlosť masáže. Postupne sa mení nastavenie z úrovne nízkej, cez strednú na vysokú.




## Funkcie masáže krku a chrbta:

-  **Iba masáž krku:** Stlačením po dobu 2 sekúnd vypnete funkciu masáže krku. Tým nie je ovplyvnená funkcia masáže chrbta. Ďalším stlačením masáž krku znovu spustíte.
-  **Iba masáž chrbta:** Stlačením po dobu 2 sekúnd vypnete funkciu masáže chrbta. Tým nie je ovplyvnená funkcia masáže krku. Ďalším stlačením masáž chrbta znovu spustíte.
-  **Pokiaľ máte zapnutú samostatnú masáž krku alebo chrbta, stlačením tohoto tlačidla obnovíte automatické prednastavenie masáže oboch častí tela.**

## Funkcie vyhrievania:

-  Stlačením po dobu 2 sekúnd vypnete režim vyhrievania. Masáž krku a chrbta je zastavená. Stlačením prepnete medzi „vysokou“ a „nízkou“ úrovňou.




## V režime vyhrievania:

-  Stlačením prepnete späť do prednastaveného režimu masáže.
-  Stlačením spustíte funkciu krku a stlačením tlačidiel hore/dolu upravíte polohu masáže krku.
-  Stlačením spustíte masáž pevného miesta na chrbte a stlačením tlačidiel hore/dolu upravíte polohu miesta masáže chrbta.



Počas používania vezmite prosím na vedomie:

- Prístroj používajte denne nanajviš 30 minút.
- Nepoužívajte počas spánku.

## ČIŠTENIE A SKLADOVANIE

-  Aby ste predišli poškodeniu a zmene farby výrobku, nečistite ho agresívnymi čistiacimi prostriedkami. Neprepichujte výrobok a neškrabte po ňom ostrými predmetmi.
-  Pred čistením zaistite, aby bol výrobok vypnutý a sieťový adaptér odpojený od zásuvky. Čistite ho suchou handričkou.
-  Výrobok udržiavajte čistý a skladujte ho na bezpečnom mieste. Vyhybajte sa prostrediu s vysokou vlhkosťou a teplotou.

## ZÁVADY A ÚDRŽBA

problémy	riešenie
výrobok nepracuje správne	Zapojte zástrčku adaptéru do zásuvky a skontrolujte kabeláž.
	Vypršala doba nastavená časovačom. Znovu stlačte tlačidlo napájania.
	Výrobok bol používaný príliš dlho a došlo k jeho prehriatiu, takže sa zapla jeho bezpečnostná poistka. Vypnite prístroj od siete a čakajte zhruba hodinu, pokiaľ vychladne.
iba vyhrievanie bez funkčnosti masážnych uzlov	 Stlačte tlačidlo automatickej funkcie a masáž znovu začne.
masáž krku nedosahuje na požadované miesto	 Stlačením tlačidla masáže krku upravte polohu masážneho vankúša.

**POZNÁMKA:** Sami výrobok nerozberajte. Firma NAIPO nenesie žiadnu zodpovednosť za straty spôsobené neodborným rozoberaním alebo úpravou výrobku. Taká činnosť môže vystaviť užívateľa nebezpečenstvu alebo spôsobiť, že bude výrobok nepoužiteľný.

So žiadosťou na ďalšiu pomoc sa obráťte na oddelenie podpory zákazníkom.

Firma NAIPO nenesie zodpovednosť za straty, škody alebo náklady na opravu vzniknuté v dôsledku alebo pokiaľ:

- Došlo k vypršaniu záručnej lehoty.
- Implementovaniu neodborných zásahov: oprava výrobku, chybné použitie, zneužitie, úprava, rozoberanie apod.
- Náhodné alebo neúmyselné poškodenie.
- Poškodenie vnútorného alebo vonkajšieho obalu či chýbajúce príslušenstvo.
- Závada spôsobená zásahom vyššej moci.

## OZNÁMENIE O ZHODE S FCC

Zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Činnosť zariadenia je možná pri splnení dvoch podmienok:

(1) toto zariadenie nesmie vytvárať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí vstrebať rušenie iného zdroja, vrátane rušenia, ktoré môže nepriaznivo ovplyvňovať jeho činnosť.

Výrobca nenesie zodpovednosť za rušenie rozhlasového alebo televízneho vysielania spôsobené neodborným zásahom do konštrukcie výrobku. Taká úprava zbavuje užívateľa oprávnenia s výrobkom manipulovať.

**POZNÁMKA:** Toto zariadenie bolo testované a vyhodnotené vyhovujúcim v rámci obmedzení pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia sú stanovené preto, aby zaisťovala určitú mieru ochrany proti škodlivým interferenciám v obytných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať energiu v pásme rádiových vln a, pokiaľ nie je inštalované a používané v súlade s týmto návodom, môže byť príčinou škodlivých interferencií narušujúcich rádiovú komunikáciu. Pokiaľ zariadenie spôsobuje škodlivé interferencie rušiace príjem rozhlasu či televízie, čo je možné overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame užívateľom interferencie vylúčiť jedným či niekoľkými nasledujúcimi spôsobmi:

- Presmerujte alebo premiestnite anténu prijímača.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom okruhu, než do ktorého je pripojený prijímač.
- Poradte sa s dodávateľom či skúseným rozhlasovým/TV technikom a požiadajte ho o pomoc.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

označenie: Masážny prístroj na krk a chrbticu oCuZenS

model: oCuZen-S1

hmotnosť: ≈ 4,96 kg

rozmery: dĺžka 820 x šírka 450 x výška 240 mm

napájanie: 12 V  $\approx$  4,0 A

príkon: 48 W

## Záruka a služby zákazníkom

Pokiaľ potrebujete pomoc vyriešiť problémy s používaním výrobku, využijte ďalšie služby apod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záručná lehota sú 2 roky od dátumu nákupu.

Vyrobené v Číne.



NEOX GROUP s.r.o. [www.neoxgroup.cz](http://www.neoxgroup.cz)